

técnica dental

Marzo-Abril No. 78 / 2013

México \$50 pesos

ESPECIAL PRÓTESIS FIJA SOBRE IMPLANTES

-Alternativas en
Disilicato de Litio

-Tallado de Circonio de manera
Práctica, fácil y precisa

-Aplicaciones del sistema
CAD-CAM en la Implantología

-BIO-CERÁMICA

Contiene
el programa
oficial del
1er. Encuentro
Internacional
8 y 9 Marzo

tecnicadental.com



DIRECCIÓN GENERAL

T.P.D. Jorge B. Argüello Hdez.
direccion@tecnica dental.com

SUBDIRECCIÓN Rosa González Villegas

DIRECCIÓN EDITORIAL Y COMERCIAL T.P.D. Alma Delia Argüello González
alma@tecnica dental.com

DIRECTOR CIENTÍFICO T.P.D. Jorge E. Argüello González
jorgealtatecnica@yahoo.com.mx

FINANZAS C.P. Francisco Rodríguez Mendoza

VENTAS Maritza Martínez Camacho
maritza@tecnica dental.com

DISEÑO EDITORIAL Ma. Del Pilar Varela Rodríguez
pilar@tecnica dental.com
Alma D. Argüello González
alma@tecnica dental.com

REDACCIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO Lic. Verónica Viñuela Gómez
veronica@tecnica dental.com

DISEÑO PUBLICITARIO Abraham Jair Avedaño
abraham@tecnica dental.com

FOTOGRAFÍA T.P.D. Angel García de la Fuente
angel@tecnica dental.com

WEB MASTER Eduardo Viñuela Gómez
web@tecnica dental.com

COLABORACIÓN CIENTÍFICA GRUPO PROMETEO INTERNACIONAL
Dr. Fernando Rojas Vizcaya, España
Dr. Pasquale Lombardi, Italia
Dr. Ciro Ghidelli, Italia
T.P.D. Georg Walcher, Italia
Dr. Juan Francisco Cabrera Negrete, México
T.P.D. Paulina Leija, México
Dr. Marco Tieman, México
Lic. Salomón Kim, Corea
MDT. Oriol de la Mata, España-México
Dr. Miguel Ángel Díez Gurtubay, México
Dra. Mirna Navarro Treviño, México
Dr. Sergio Ariosto Hernández Delgado, México
TPD. Eladio González Gómez, México

suscripciones: (55) 55236107 / www.tecnica dental.com

Revista bimestral Marzo-Abril 2013

Editora responsable: Alma Delia Argüello González.

Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo del título: 04-2010-030418381300-102

Certificado de licitud del título y contenido: 15540

Expedido por la Secretaría de Gobernación.

ISSN 1870_5626.

Registro Postal por SEPOMEX: PP09-1593.

Domicilio de la publicación: Av. Colonia del Valle 818,
Col. del Valle, C.P. 03100. México D.F. Tels: 5523-6107,
5543-0499, 01800-6337400.

Alta Técnica Dental no se identifica necesariamente con las opiniones expresadas libremente en sus páginas por los colaboradores. Las ofertas promociones y contenido de los anuncios son total responsabilidad de los anunciantes. Queda estrictamente prohibida la reproducción parcial o total del contenido por cualquier medio incluyendo los magnéticos y electrónicos sin previa autorización por escrito de los editores. Nos reservamos el derecho de proteger nuestra propiedad intelectual en todo el mundo.

Queda estrictamente prohibida la reproducción parcial o total de cualquier diseño publicitario realizado por parte de Alta Técnica Dental para los patrocinadores, sin previa autorización por escrito de los editores.

“Existimos temporalmente a través de lo que tomamos, pero alcanzamos la eternidad por medio de lo que damos” *Douglas M. Lawson*

Jesucristo decía: “Hay más felicidad en dar que en recibir”, pero entonces ¿por qué es tan difícil para las personas exitosas compartir los secretos de su éxito?

A pesar de existir muchas causas como el egoísmo, la inseguridad o la incapacidad de detectar las “semillas del éxito” en los demás, la principal, creo yo, es la falta de capacitación, es decir, muchos no ayudan a crecer a quienes los rodean porque no saben cómo hacerlo. Para “ser mentor” no se estudia: En la escuela si bien se puede recibir una formación académica para ser profesor, allí se aprende a transmitir información frente a un grupo, pero no a colocarse al lado de cada persona y apoyarla para que alcance un nivel superior en su desarrollo, ya sea personal o profesional, ello implica algo más que proporcionarle información o destrezas.

Hoy agradezco profundamente el hecho de contar con grandes seres humanos, queridos amigos todos ellos dispuestos a compartir los conocimientos y experiencias que les han permitido posicionarse en el gremio dental como líderes de opinión. Profesionales comprometidos, dispuestos siempre a arriesgar sus recursos para innovar, personas destacadas en la historia de la Odontología, quienes hoy forman el grupo de mentores en prótesis fija y de manera especial, sobre implantes. Ellos han invertido incontables horas de trabajo para compartir contigo esa magia con la que logran rehabilitar a otro ser humano.

Gracias Dr. Ángel Pérez, MDT. Eladio González, Dr. Fidel Sotelo, Dr. Francisco Cabrera, MDT. Germano Gritti, T.P.D. Jorge Manella, Dra. Lourdes Ramírez, Dr. Nestor Schejman, Dr. Onan Martínez, MDT. Peer Kulzer, MDT. Rafael Santrich, T.P.D. Roberto González, Dr. Sergio Vilchis y MDT. Thomas Graber.

Asimismo me complace de manera especial el verte hoy aquí dispuesto a aprender con humildad lo que tan dignamente estos mentores desean compartir contigo: Gracias por invertir tu tiempo y recursos en este innovador proyecto al cual todos contribuimos para transformar la rehabilitación de un paciente: Odontólogo, Implantólogo, Protesista o Técnico Dental, tú haces posible la restauración funcional y estética.

¡Gracias por formar este equipo y así lograr todos unidos que el mundo sonría de nuevo!

Bienvenido al 1er. Encuentro Internacional de Prótesis sobre Implantes, Prótesis Fija y Estética.

T.P.D. ALMA ARGÜELLO
Directora comercial

Ceramco[®]3



La porcelana feldespática **Ceramco 3** se produce con la más alta calidad de procesos para lograr excelente manipulación y un alto nivel estético. El sistema completo desde los opacos en pasta o polvo, hasta las dentinas, esmaltes naturales y opalescentes poseen la fluorescencia de la dentición natural.

El sistema de color asegura al técnico, con conocimientos básicos como avanzados, crear tonos repetibles y predecibles con facilidad. Todos los tonos están disponibles en frascos sin la necesidad de medir, ni mezclar y así evitar errores. Múltiples opciones de esmaltes que pueden combinarse para obtener lo mejor de cada uno de ellos.

Todas las porcelanas Ceramco 3 ofrecen:

- Facilidad de manejo.
- Reproducción constante de los tonos, directos del frasco.
- Estética de alto nivel sin tener que mezclar polvos.
- Todos los tonos Vita y tonos de blanqueamiento que satisfacen las necesidades de los clientes.

Ceramco 3 no es sólo “opaco, dentina y esmalte”
Ceramco 3 está disponible en gran variedad de materiales.

1. **Opacos** en polvo y en pasta.
2. **Modificadores** de opaco para caracterizar desde el interior.
3. **Dentinas** opacas útiles en áreas de poco espacio.
4. **Modificadores** de dentina para aumentar la intensidad de los tonos.
5. **Intensificadores** para mamelones.
6. Esmaltes **Naturales y Opales**.
7. Esmaltes **Softwear[®]** que generan bajo desgaste y preservan los dientes naturales.
8. Porcelanas de **Hombro** para la técnica “collarless”.
9. Porcelanas **Add-On** para hacer pequeñas correcciones sin perder la forma de la corona.
10. Porcelanas de tonos **Encía**
11. **Tintes de baja fusión** con gran variedad de tonos para hacer sus caracterizaciones preferidas.

Ceramco 3 logra excelentes resultados sin necesidad de mezclas.



Síguenos en Twitter @DentsplyLABmx

Su mayor nivel de estabilidad permite lograr con **Ceramco 3** alta estética de manera consistente, desde pequeñas coronas hasta grandes puentes que requieren múltiples horneados.

Los investigadores de **Dentsply** mejoran continuamente dada su tradición por obtener porcelanas de calidad más fina. Nuestros estándares garantizan que cada frasco de **Ceramco 3** logre o supere sus expectativas.

Guías de tonos Ceramco 3

Las guías de tono **Ceramco 3** consisten en tabletas horneadas de cada una de las porcelanas. Están diseñadas para ayudar a visualizar los resultados estéticos deseados tomando como base la apariencia de la porcelana horneada.



Tabla de horneado

Ceramco[®]3
El nombre detrás de una sonrisa natural.

Programa	Programa horneado °C											Programa horneado °F					
	Tiempo (min)						Vacío	Establecer Temp		Temperatura			Establecer Temp		Temperatura		
	Secar	Precal.	Mant. Vacío	Mant. Alta Temp	Mant	Enfriar	(in. Hg)	Inicial	Alta	Vacío Inicio	Vacío Fin	Tasa Calor °C/min	Inicial	Alta	Vacío Inicio	Vacío Fin	Tasa Calor °F/min
C3 Opaco pasta	5	3	0	0	0	0	29	500	975	500	975	100	932	1787	932	1787	180
C3 Opaco polvo	3	3	0	0	0	0	29	650	970	650	970	70	1202	1778	1202	1778	126
C3 Margen	5	5	0	1	0	0	29	650	965	650	965	70	1202	1769	1202	1769	126
Margen Final (c/ glaseador)	3	3	0	0.5	0	0	29	650	935			70	1202	1715			126
Margen Final (c/ glaseado natural)	3	3	0	0.5	0	0	29	650	945			70	1202	1733			126
Dentina Op/Dentina/Mod/Esmalte	5	5	0	0	0	0	29	650	960	650	960	55	1202	1760	1202	1760	99
Glaseado Natural	3	3	0	0.5	0	0	29	650	945			70	1202	1733			126
SobreGlaseador	3	3	0	0.5	0	0	29	650	935			70	1202	1715			126
Add-On /Encia	5	5	0	0	0	0	29	650	940	650	940	70	1202	1724	1202	1724	126



Bio
Cerámica
p24



Alternativas en disilicato de litio
p33

Edición Especial Prótesis Fija



tecnicadental.com



facebook.com/tecnicadental



twitter.com/tecnicadental

CONTENIDO

11	Restauración con y sin base de Titanio
19	Tallado de Circonio de manera práctica
22	Aplicaciones de sistema CAD/CAM en la Implantología
54	Distribuidores Estrella
56	Calendario de Cursos y Conferencias
58	Subasta Dental

Especial Encuentro

38	1er. Encuentro Internacional
39	Bienvenida
40	Perfiles de Conferencistas
42	Programa
43	Área Comercial

45	Hoteles y Rutas de acceso
46	Lugares de Interés
47	Actividades Culturales
48	Promociones
52	Código de Acceso

COLABORADORES EN ESTE NÚMERO

Dr. Fernando Rojas Vízcaya, España
Dr. Pasquale Lombardi, Italia
Dr. Ciro Ghidelli, Italia
T.P.D. Georg Walcher, Italia
Dr. Juan Francisco Cabrera Negrete, México
T.P.D. Paulina Leija, México
Dr. Marco Tieman, México

Lic. Salomón Kim, Corea
MDT. Oriol de la Mata, España-México
Dr. Miguel Ángel Díez Gurtubay, México
Dra. Mirna Navarro Treviño, México
Dr. Sergio Ariosto Hernández Delgado, México
TPD. Eladio González Gómez, México

PATROCINADORES

IVOCLAR, ZHERMACK, PARTIAL FLEX, NEW DENTAL, MDC DENTAL, DENTSPLY, ZIRKONZAHN, VACIADOS DENTALES XOLA, ESTUDIO ODONTO-TÉCNICO, MART-DENTAL, JOPER DENTAL, DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTÉS, ZIRKONIUM YZR, MOLIDENT, DIGIMAX SYSTEM, NEW DENTAL, IDEAS DENTALES, CENTRO PROFESIONAL DE FRESADO Y HERAEUS KULZER.



NEW

NUEVOS HORIZONTES CON ANKYLOS® C/X

DESCUBRA

la opción de indexación

Por más de 20 años, ANKYLOS® y su Conexión TissueCare que protege los tejidos duros y blandos, han permitido mantener la estética y función a largo plazo.

Con conexión
TissueCare



Con conexión
TissueCare e Index



Ahora sólo con ANKYLOS® C/X usted puede seleccionar:

- Pilares con Index (/X) para una colocación simple y precisa.
- Pilares sin index (C/) que le dan libertad de posicionamiento.
- Ambos pilares tienen la conexión TissueCare que ofrece estabilidad óptima y evita rotaciones.

Curso de certificación Ankylos

¿Conoces los aditamentos protésicos y restauraciones de Ankylos C/X?, solicita informes en **Dentsply Educación Continua** 01(55) 5587 6488 ext. 273

Indispensable tener conocimiento en restauraciones sobre implantes

ANKYLOS® | **DENTSPLY**
FRIADENT

Asiste al 1er. ENCUESTRO INTERNACIONAL

DE PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES, PRÓTESIS FIJA Y ESTÉTICA

*Cuéntanos tu experiencia
y Gana tu entrada al congreso de agosto!!*

1er. ENCUESTRO INTERNACIONAL

DE PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES, PRÓTESIS FIJA Y ESTÉTICA

CONGRESO PARA ODONTÓLOGOS, IMPLANTÓLOGOS, PROTESISTAS Y TÉCNICOS DENTALES

RECUERDA!!

las mejores 50 historias
entrarán GRATIS al
XIII Congreso Internacional
de Técnicos para Técnicos
el 2, 3 y 4 de Agosto 2013
en Expo Reforma

envía tu historia
y tu foto a:
info@tecnicadental.com

todas las historias obtienen
hasta un 20% de descuento
en la entrada al congreso

:)



fecha limite de
recepción:
12 Abril

Informes: 5523.3763 / 5523.6107
Lada sin Costo: 01800.633.7400

alta
tecnicadental
LA REVISTA



Amplio articulador para el montaje correcto de los modelos dentales

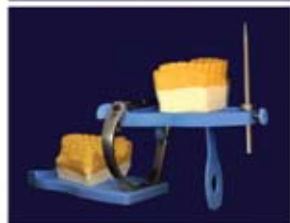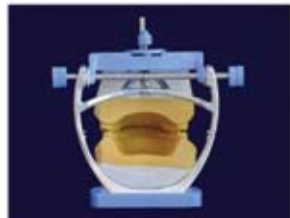

- Extraordinaria visión pósterio-anterior hacia los modelos, por su parte lingual y palatal.
- Sobre soporte del vástago anterior y tornillo posterior para poder retirar el vástago incisal y poder trabajar en la parte anterior.
- Base para montaje de los dientes superiores con guías de referencia para el montaje de los dientes.
- Vástago incisal graduado sobre guía anterior angulada.
- Permite múltiples montajes debido a sus platinas magnéticas.
- Guías perforadas en la parte interna de ambas ramas del articulador.
- Soporte de descanso para rama superior en apertura.
- Movimientos de protrusión y retrusión; así como, lateridades.



Variedad de colores



Gdl: (33) 3833-0333
Mexico, D.F. (55) 5547-4747
01 800 3637 800

mdc@dental.com.mx

www.dental.com.mx

gingifast rigid

Silicona para la reproducción de encía falsa sobre modelos

Aplicaciones:

La reproducción gingival utilizada en **implanto-prótesis** simula el acondicionamiento del tejido gingival para la determinación de la forma de los bordes cervicales y el perfil de emergencia de la prótesis

Ventajas:

- ▶ La dureza equilibrada facilita el fresado de los bordes durante el acabado de la encía en el modelo
- ▶ Exacto y dimensionalmente estable
- ▶ Dureza después de 1 hora: 70 Shore A
- ▶ Tiempo de polimerizado (23°): 10 min



zetalabor

Silicona-C específica para el laboratorio, dureza final 85 Shore A

Aplicaciones:

Llaves de control para proyectar la estructura metálica

Llaves para la resina en prótesis combinadas

Llaves para la realización de prótesis provisionales a mano

Llaves para la reproducción de encías en prótesis removibles

Aislamiento de dientes/yeso en la mufla

Ventajas:

- ▶ Altísima capacidad de deslizamiento inicial
- ▶ Dureza final (85 Shore-A)
- ▶ Resistencia al calor (140° C)
- ▶ Elevada posibilidad de reproducción de los detalles
- ▶ Elevada resistencia elástica



Cursos de prótesis fija en alianza con:

Mayo 30 y 31



01800 300 3009 0155 5785 6755
www.vita.com.mx



5672 2830 01800 111 2257
www.balsasdentalmx.com



5203-3817 5203-3806
www.depositodentalbyk.com

tels: 5672 2830

01800 111 2257

Balsas | DENTAL

Innovación, Calidad y Servicio... compromiso de Satisfacción.
Tajín 110 Col. Narvarte C.P. 03320, Benito Juárez, México D.F.
Tel. 01 (55) 5672 2830 Lada sin Costo 01800 111 2257
www.balsasdentalmx.com

Cupón

Intercambia este cupón por muestras gratis de yeso en el stand de Balsas Dental durante el evento del 8 y 9 de marzo de 2013 en el 1er encuentro de implantes de prótesis fija y estética, que se llevará a cabo en Expo Reforma.

Nombre: _____ Estado: _____

Tel: _____ E mail: _____

Este cupón únicamente es válido para las primeras 100 personas.



— Bio —



Cerámica

Oriol De La Mata

Desde hace años busco la manera “correcta” de hacer una corona de cerámica, siempre intentando emular a la naturaleza, lo que me ha llevado a experimentar diversas maneras para conseguir mi objetivo, utilizando siempre dientes extraídos, modelos de yeso, fotografías, etcétera.

Hacer “coronas” que parezcan “dientes” es un proceso sumamente complejo porque aunque los materiales han avanzado acercándose cada vez más a las propiedades ópticas de la dentina y el esmalte, estos siempre nos llevarán la delantera.

Hace mucho tiempo se me ocurrió quitarle el esmalte a algunos dientes extraídos (foto 1 y 2) para observar la dentina, en particular su configuración tanto en forma como en color, lo cual cambió mi vida profesional:



Foto1.



Foto 2.

Desde entonces intento basar mi estratificación en ello, según mostraré en este artículo.

Situación de partida (foto 3).

DIENTE NATURAL EXTRAÍDO QUE INTENTAREMOS IMITAR.



Foto 3.

ESTRATIFICACIÓN

La primera capa es la dentina opaca, entonces buscaremos oscurecer el núcleo de tal manera que sirva de base a la estratificación. Generalmente aplico dos colores: el cervical, un tono más oscuro (C4) y el color base (C3). Es importante hacer una aplicación muy delgada (0.3mm) y sobrepasar el contorno de la estructura dejándola de manera irregular, simulando así los mamelones (foto 4). Además, en esta horneada podemos dotar de color a la cara palatina usando algún modificador más saturado.



Foto 4.

SEGUNDA HORNEADA: LA DENTINA.

En este paso, para evitar la reducción del valor de la restauración, aclaramos un tono el color base (C2), debe ser muy delgado y exceder la dentina opaca. En lo personal prefiero marcar los mamelones en la parte vestibular del diente (foto 5) y no en el borde incisal ya que así no quedan tan evidenciados; para resaltarlos ponemos una masa que absorba luz, LT Natural, Aqua Blue 1 ó 2 (foto 6) cubriendo el tercio incisal con masa de esmalte correspondiente, sobrepasando por poco la dentina y dándole la forma dentinaria que observamos en el diente a imitar (foto 7, 8).



Foto 5.



Foto 6.



Foto 7.



Foto 8.

Generalmente lo horneo una vez más para darle las transparencias necesarias en el borde incisal y áreas proximales (foto 9) con algún transparente (T Blue, NT Natural, TX, etcétera) y efectúo los agregados necesarios en el contorno, así como en la cara palatina.



Foto 9.

Una vez obtenida la forma dentinaria con su respectiva translucidez y opacidad, acondicionamos la superficie de la corona raspándola hasta alisarla y efectuar la técnica "Internal Live Stains" (del maestro Hitoshi Aoshima), en este momento debemos enfocarnos en las características internas (fracturas, descalcificaciones, mamelones, etcétera) del diente a elaborar y maquillarlas con los stains internos (foto 10). En lo particular horneo varias veces a baja temperatura, sólo para fijar los stains (foto11).



Foto 10.



Foto 11.

HORNEADA DE TRANSPARENTES:

Aquí nos enfocamos en la forma del diente y la llevamos a cabo con transparentes distintos (foto 12). En este caso todo el tercio incisal fue cubierto con un esmalte anaranjado y rematado con una mezcla de dentina e incisal aureola; el resto de la corona se cubrió con LT1, un transparente opalescente muy parecido al esmalte natural (foto13).



Foto 12.



Foto 13. Corona terminada.



ORIOL DE LA MATA

Curso Noritake

17 y 18 de Mayo

Informes: orallinelaboratorio@hotmail.com

Tel. 01-222-4130508



Adiós Vera!



NUEVA ALEACIÓN PREMIUM
CON TITANIO PARA RESTAURACIONES
METAL - CERÁMICA

Superior que VeraBond!...
y al mismo precio

- Alta resistencia flexural
- Más blando que los de su tipo
- Mejor estabilidad dimensional
- Bio compatibilidad por contener titanio
- Compatible con todas las porcelanas



COMANDIUM

COMANDIUM II

Formulación libre de Berilio

AalbaDent

 **MDC**
DENTAL

GUADALAJARA (33) 3833-0333
MÉXICO, D.F. (55) 5547-4747
01 800 3637 800

www.dental.com.mx



EXPERIMENTA LA LIBERTAD
QUE TE DA EL CONOCIMIENTO®



MARCA EL 214º DÍA DE TU CALENDARIO

NUEVO DVD
CERÁMICA
ESTRATIFICADA
LIBRE DE
METAL
TPD CARLOS
MAYORGA

carillas, chips e incrustaciones
sobre modelo refractario, forma, color y translucidez

alta
técnica**dental**
LA REVISTA

Costo: **\$230.00**

Pídelo al 5523.3763 / 5523.6107 / 01800.633.7400



Duración: 82 min.

PROMOCION

GEMINI^{LT}
La nueva generación
shenp^{az}
electr^{therm} group

**12
MESES**

- Mufla CAT para un funcionamiento preciso.
- Distribución de calefacción totalmente uniforme.
- Temperaturas muy precisas en los niveles bajo, medio y alto.
- Mejora la productividad con el enfriamiento de alta velocidad.
- Con material Kanthal spiral durable hasta 1180°C (2156°F), con transferencia de calor entre 10-120°C (50-248°F)/min.
- Pizzas de refracción originales en stock.
- Técnicos calificados disponibles.
- 30 meses de garantía.

Como la tecnología de Gemini LT Twin-Table puede aumentar la capacidad de trabajo

Una característica única es las dos mesas giratorias programables, que optimizan la productividad al ahorrar valioso tiempo de preparación.

- Le permite programar una segunda cocción antes de que el primero haya terminado.
- Dos ceramitas pueden trabajar simultáneamente, cada una en su propia mesa de cocción.
- Le otorga completa libertad de movimiento, mientras que el trabajo está en curso, no hay necesidad de esperar al lado del horno.

MDC[®]
DENTAL

Guadalajara (33) 3835-0333
México, D.F. (55) 5547-4747
01 800 3637 800

www.dental.com.mx
mdc@dental.com.mx

INTERNACIONALES

Argentina

Ar-T Dental / Juan Marcos Buda
Laboratorio Integral de Estética Dental
www.artdental.com.ar
www.artecinvent.com.ar
E-mail: ar-tec@argentina.com
Msn: jmbuda@hotmail.com
Skype: ar-tec
Tel (0054) 114709-1950
Fax (0054) 114709-2229

Bolivia

Recedent
feliperevilla@hotmail.com
Tels: (00591) 2-279-0040
La Paz, Bolivia

Chile

Carmen Magdalena
Espinoza Rivas
malena1145@yahoo.es
Tel. Movil: 41-231-2932,
9577 5284
Dirección: Casilla 3545
Concepción, Chile.

Ecuador

Dra. Graciela Machuca
Tels: (00593) 728-16-475,
0-95-11-20-54
tecnicadental_ec@hotmail.com
graciela_mahuca@hotmail.com
Cuenca, Ecuador

Panamá

Centro Especial de Prótesis
Dental Inmediata
Tels: (00507) 225-82-61

El Salvador

Corporación Dental Del Salvador
Tels: (00503) 222-20-578
San Salvador, El Salvador

Guatemala

Depósito Dental Dentimart
dentimart@yahoo.com
Tels: (00502) 24-75-2050

República Dominicana

José de los Santos
De los Santos Dental, S.A.
Santiago, República Dominicana
tel. 809-241-1342
cel. 809-430-5659
skype:de.los.santos.dental

ATD USA

Río rico 1152, Satula CT, Río Rico Arizona
Salvador Carrillo
rioricosal@hotmail.com
Tels: 631-105-7778,
520-285-99-82

Tegucigalpa, Honduras

Col. Florencia Norte
Ortencia Pérez
orte272002@yahoo.com.mx
Tel. (504) 2232-4996

DISTRIBUIDORES / DONDE PUEDES COMPRAR LA REVISTA

Distrito Federal

Depósito Dental Corona
Azcapotzalco
5527.2402

Depósito Dental Cafetales
Coyoacán
5671.8612
cafetales20@yahoo.com.mx

Depósito Dental Maden
Cuauhtemoc
5521.4840

Depósito Dental Cabrera
Iztapalapa
5744.4576
dedenca@hotmail.com

Depósito Dental Chuy
Iztapalapa
5744.1008

Depósito Dental Domínguez
Iztapalapa
5686.2009
ddominguez@live.com.mx

Depósito Dental Guelatao
Iztapalapa
5745.1248
Deposito_guelatao@hotmail.com

Depósito Dental Ludy
Iztapalapa
5744.6067
d.d.ludy@hotmail.com

Depósito Dental Yuri
Iztapalapa
5701.1717
ddy@live.com.mx

Laboratorio y Depósito Dental
Jhyre
Milpa Alta
2000.7807

Depósito Dental San Francisco
Tláhuac
3871.2639

Estado de México

Depósito Dental Jireh
Atizapán de Zaragoza
5825.2716
depositodental_jireh@gmail.com

Depósito Dental Mendoza
Chalco
3092.5361
erandy75@hotmail.com

Depósito Dental Egydent
Coacalco
3687.4687
depositoegydent@hotmail.com

Depósito Dental Bosques
Cuautitlán Izcalli
5871.7126
ddbosques@yahoo.com.mx

Depósito Dental Azteca
Ecatepec de Morelos
5775.7160
ddentalazteca@live.com.mx

Depósito Dental Vick Dent
Ecatepec de Morelos
5770.2590
vick_dent87@hotmail.com

Vaciado Dental La Fundidora
Ecatepec de Morelos
5699.6813
lafundidora-leo@hotmail.com

Depósito Dental Depot Satélite
Naucalpan
5398.4557
dentaldepotsatelite@prodigy.net.mx

Depósito Dental Dentineza
Nezahualcóyotl
5793.4645
acabrera05@hotmail.com

Depósito Dental Diprodent
Nezahualcóyotl
5783.6208
diprodent_1@hotmail.com

Depósito Dental San José
Nezahualcóyotl
5735.4351
pmo_odontologico@hotmail.com

Laboratorio y Materiales
Dentales de Oriente
Texcoco
0159.5952.3233
Imdoriente@hotmail.com

Depósito Dental Matamoros
Toluca
01722.2121.394
ddentalmatamoros@hotmail.com

Depósito Dental Pleyadent
Toluca
01722.2198.529
pleyadent@hotmail.com

Interior de la República

Depósito Dental Equipos y
Materiales Dentales Willy
Boca del Río, Veracruz
01229.927.30.95

Depósito Dental Express
Cancún, Quintana Roo
01998.884.91.01
depositoexpress@prodigy.net.mx

Depósito Dental Agramant
Celaya, Guanajuato
01461.616.21.39
pm.agramant@hotmail.com

Depósito Dental
Maldonado
Celaya, Guanajuato
01461.612.31.86

Depósito Dental del Centro
Cuernavaca, Morelos
01777.318.81.31
depositodentaldelcentro@hotmail.com

Depósito Dental Gama
Cuernavaca, Morelos
01777.312.39.96
ely.gamav@hotmail.com

Depósito Dental Mundi-Dent
Cuernavaca, Morelos
01777.318.72.87
mundident_dephotmail.com

Depósito Dental Paliza
Culiacán, Sinaloa
01667.716.19.34
palizadental@hotmail.com

Productos Dentales Odontec
Culiacán, Sinaloa
zaon17@hotmail.com

Depósito Dental Ivori
Guadalajara, Jalisco
01333.825.98.26
palizadental@hotmail.com

Depósito Dental Maram
Guadalajara, Jalisco
01333.826.07.27
kmalus@maram.com.mx

Depósito Dental Gardent
Irapuato, Guanajuato
01462.624.20.79
gardentirapuato@hotmail.com

Depósito Dental Vacnort
Irapuato, Guanajuato
01462.626.13.51

Depósito Dental Odontotec
Jiutepec, Morelos
01777.319.06.96
odontec@hotmail.com

Depósito Dental García
León, Guanajuato
01477.718.43.85
garciabermudez@yahoo.com.mx

MARZO-ABRIL 2013

DISTRIBUIDORES / DONDE PUEDES COMPRAR LA REVISTA

Depósito Dental Guerrero
León, Guanajuato
01.477.713.78.83
dentalguerrero.guerrero238@gmail.com

Depósito Dental Nazahi
León, Guanajuato
01.477.717.00.53
deposicionazhai@hotmail.com

Prodent Monterrey
León, Guanajuato
01.477.716.45.30
prodentmonterrey@yahoo.com.mx

Productos Dentales del Pacífico
Mazatlán, Sinaloa
01.669.981.15.98
productos_dentalesdelpacifico@hotmail.com

Distrident
Mérida, Yucatán
01.999.923.28.05
distrident@hotmail.com

Depósito Dental Mundo Dental
Monterrey, Nuevo León
01.818.030.78.18
crenau@hotmail.com

Depósito Dental Treviño
Monterrey, Nuevo León
01.818.346.56.17
onivert@intercable.net

Davley Dental
Morelia, Michoacán
01.443.314.92.85
davleydenta@hotmail.com

Depósito Dental Amenta
Morelia, Michoacán
01.443.312.17.33
amenta.director@prodigy.net.mx

Depósito Dental Del Real
Morelia, Michoacán
01.443.324.54.72
doloreservin@hotmail.com

Depósito Dental Evolución Dental Silva
Morelia, Michoacán
01.443.324.11.27
depo_dentsilva@hotmail.com

Depósito Dental Tecnodent
Morelia, Michoacán
01.443.313.44.83
leti_olivos@hotmail.com

Depósito Dental Valencia
Morelia, Michoacán
01.443.314.83.25
davleydenta@hotmail.com

Depósito Dental C.U.
Oaxaca, Oaxaca
01.951.506.01.22
pedidos_cu@hotmail.com

Depósito Dental DONOSTI
Oaxaca, Oaxaca
01.951.513.91.23

Depósito Dental Toscano Medina
Oaxaca, Oaxaca
01.951.515.95.11
jav128@prodigy.net.mx

Depósito Dental Hidalgo
Pachuca, Hidalgo
01.771.713.26.79
dentalhgo@hotmail.com

Depósito Dental Juárez
Poza Rica, Veracruz
01.782.823.20.86
deposito_dentaljuarez@hotmail.com

Concepto Dental
Puebla, Puebla
01.222.591.68.40

Depósito Dental El Camino
Puebla, Puebla
01.222.246.42.10
dentalcamino@hotmail.com

Depósito Dental México
Puebla, Puebla
01.222.240.88.64

Depósito Dental Puebla
Puebla, Puebla
01.222.240.57.84
d.d.puebla@hotmail.com

GS Dental
Puebla, Puebla
01.222.211.10.99
gs_dental@hotmail.com

Depósito Dental Azul
Querétaro, Querétaro
01.442.349.46.93
italociani@hotmail.com

Depósito Dental Plazas Del Sol
Querétaro, Querétaro
01.442.403.87.26
olverajp@gmail.com

Corporación Dental Stanford
S.L.P., S.L.P.
01.444.814.99.20
cdentalstanford@hotmail.com

Depósito Dental Maesa
S.L.P., S.L.P.
01.444.818.73.26
lourdes_gallegos@yahoo.com.mx

Artículos Dentales de Nayarit
Tepic, Nayarit
01.311.215.59.75
bon_000@hotmail.com

Depósito Dental Gómez Farias
Tijuana, Baja California
01.664.290.02.65
depositodentalgomezfarias@hotmail.com

Depósito 100% Dental
Toluca, Estado de México
01.722.318.46.88

Depósito Dental Alphadent
Toluca, Estado de México
01.722.212.95.55

Depósito Dental Cosmodent
Uruapan, Michoacán
01.452.524.61.82
cosmodent_upn@hotmail.com

Depósito Dental Di Denal
Uruapan, Michoacán
01.452.524.33.56
ddn24@hotmail.com

Depósito Dental Gaby Dent
Veracruz, Veracruz
01.229.931.52.58
gaby_dent@hotmail.com

Depósito Dental Gómez
Zamora, Michoacán
01.351.512.23.24
depositodentalgomez@hotmail.com

Attachments para prótesis

RHEIN83®



- ESTÉTICAS
- FUNCIONALES
- DE ALTA CALIDAD

COMBINADAS: FIJAS Y REMOVIBLES
Tecnología y diseño Italiano

MDC®
DENTAL

Guadalajara (33) 3833-0333
Mexico, D.F. (55) 5547-4747
01 800 3637 800
mdc@dental.com.mx

· SURTIDO EN REPUESTOS

www.dental.com.mx



1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES, PRÓTESIS FIJA Y ESTÉTICA

EVENTO PARA ODONTÓLOGOS, IMPLANTÓLOGOS, PROTESISTAS Y TÉCNICOS DENTALES



tecnicadental.com/encuentro-fija

Informes: 5523.3763 / 5523.6107 / 01800.633.7400

EL EVENTO MÁS ESPERADO EN EL MUNDO DENTAL

8 Y 9 MARZO 2013



EXPO REFORMA CIUDAD DE MÉXICO



"Protesis Atornilladas Híbridas"

1 y 2 de Marzo 2013

Curso-Taller

"Estética de Disilicato de litio, textura, maquillaje y glaseados perfectos"

23 de Marzo 2013

Conferencia-Taller

"Prótesis sobre implantes híbridas tipo Toronto sub y supra estructura"

5 - 6 Abril 2013

Curso-Taller

Imparte: T.P.D. Jorge Argüello

Informes: 56 87 85 36 / 44 29 07 32



Curso de Cerámica con el Dr. Arturo Godoy.
(Marzo 11 y 12)

Curso Prettau® A con T.P.D Alan Quiñones.
(Marzo 18 y 19)

Curso Iniciación con T.P.D. Alan Quiñones.
(Marzo 25 y 26)

Curso de Cerámica con el Dr. Arturo Godoy.
(Abril 08 y 09)

Curso Prettau® B con el T.P.D Alan Quiñones.
(Abril 22, 23 y 24)

Curso de Introducción al Sistema de Fresado Manual T.P.D. Humberto Muñoz (Abril 29 y 30)

Todos los jueves presentaciones CAD/CAM.
Mayores informes:

Zirkonzahn México Centro de Capacitación.

Tel. 01 462 62 2 22 24

info.mex@zirkonzahn.com



Porcelana avanzado

T.C.D. Pablo Baltodano

Marzo 4 - 5

Carillas de porcelana

Dr. Fernando Martínez Chavarría

Marzo 7

Dentsply informes: Tel.: 55 87 64 88 /
55 87 60 70 Fax: 53 68 49 46



Grand Hotel & Convention Center

Sede: Acapulco

25, 26 y 27 de Abril, 2013

Info: dentalproductsmx@hotmail.com

Fernando Tovar Tavera



Imparte TPD Alejandro Ito
13 de Abril

Informes:

Tel: 55 14 87 21 / 55 19 00 14

55 60 56 34

www.ideasdentales.com



Ideas Dentales



@ideasdentales



Universidad Nacional
Autónoma de México
Facultad de Odontología
Coordinación de
Educación Continua

6to. Congreso de Fisiología en el Sillón 2013
9 de Marzo

Simposium Internacional de Ortodoncia
3 y 4 de Abril

Curso de Actualización de Periodoncia
11 y 12 de Abril

Foro de Clínicas Periféricas
25 y 26 de Abril

Sede: México D.F. CU UNAM
Tel: 55 23 22 44 / 56 23 22 20 /
56 23 22 25



Curso Manejo efectivo del tiempo.

13 y 14 de Abril.

Irapuato, Guanajuato.

Imparte: TPD Alma Argüello

(Directora comercial de Alta Técnica Dental)

Costo del curso: \$1,400.00
Incluye Planificador y Agenda

Informes: 014626 25 67 50

Contacto: Adrián Velázquez.

alma@tecnicadental.com



NIC TONE[®]



MDC[®]
DENTAL

Guadalajara (33) 3833-0333
Mexico, D.F. (55) 5547-4747
01 800 3637 800

www.dental.com.mx
mdc@dental.com.mx

Vendo

Vendo Mufla nueva para horno de porcelana Ney Sun Fire \$3,200.00. Pindex Whaledent medio uso \$2,800.00. Horno para Porcelana, manual Jelenko LT \$12,000.00. Horno para porcelana Unitek Ultramat CDF digital automático \$18,000.00. Mezcladora de vacío Whip-Mix \$8,000.00. Horno Ney 660 \$9,000.00. Pastillas EMAX \$280.00 c/u. Estetic \$100.00 c/u. Además contamos con servicios de laboratorio, coronas o carillas e.max Ivoclar \$750, corona metal porcelana Ceramco 3 \$375.00. Envíos por ETN y DHL. Costos más envío. Enviamos a cualquier parte del país. Informes: 3673-4550 / 3673-2341 / cel: (04455) 33-1465-7175.

Vendo Horno seminuevo Ep 500 Ivoclar \$70,000. Informes: 5584-8161. José Sierra.

Vendo Mufla nueva para horno de porcelana Ney Sun Fire \$3,200.00. Pindex Whaledent medio uso \$2,800.00. Horno para Porcelana, manual Jelenko LT \$12,000.00. Horno para porcelana Unitek Ultramat CDF digital automático \$18,000.00. Mezcladora de vacío Whip-Mix \$8,000.00. Horno Ney 660 \$9,000.00. Pastillas EMAX \$280.00 c/u. Estetic \$100.00 c/u. Además contamos con servicios de laboratorio, coronas o carillas e.max Ivoclar \$750, corona metal porcelana Ceramco 3 \$375.00. Envíos por ETN y DHL. Costos más envío. Enviamos a cualquier parte del país. Informes: 3673-4550 / 3673-2341 / cel: (04455) 33-1465-7175.



Costo por anuncio:

Público general: **\$150**
Suscriptores: **Gratis**

Comunícate a los teléfonos:
5523-3763 / 01800-633-7400

Vendo Horno seminuevo Ep 500 Ivoclar \$70,000. Informes: 5584-8161. José Sierra.

Solicito

Solicito Técnicos dentales ceramistas que sepan montar porcelana, dominen modelado, estética y laboratorio. Horario completo. Excelente sueldo. Presentarse en Alvaro Obregón No. 40 Piso 3, Col. Roma. Jairo Campos Vargas.

Solicito Técnico Dental con experiencia mínima de dos años en preparar estructuras de metal y montar porcelana. Ofrezco buen sueldo y prestaciones de ley (IMSS, INFONAVIT). Enviar curriculum a zapodent@hotmail.com Mayores informes: 3414-12-7946.

Solicito Técnico dental para el área de metales con experiencia. Informes: 2451-9101 / Nextel: 3624-9567. Ruth Mayen.

Reparo hornos de porcelana y equipo Dental. Informes: 5687.8536 / 4429.0732.



- Fácil uso
- No es pegajosa
- Excelentes propiedades para contornear
- Mantiene los dientes firmemente
- Encerado rápido y eficiente
- Extraordinaria para casos a prueba
- Descerado limpio y sin residuos

• **Presentación 1/2 lb y 5 lbs**



Disponible en los siguientes tipos

- Cera media toda estación [Rosa]
- Cera dura [Rosa]
- Cera extra dura [Rosa]
- Cera suave para rodillos [Rojo]



Guadalajara (33) 3833-0333
Mexico, D.F. (55) 5547-4747
01 800 3637 800



NUEVO

For Better Dentistry

DENTSPLY

StarLoy N'

La nueva estrella de México

Si no la encuentra en el depósito llámenos

- ★ Excelentes propiedades mecánicas y alta resistencia a la corrosión.
- ★ Fácil de tallar, ajustar y pulir.
- ★ Gran unión a las porcelanas dentales como Ceramco, Duceram KISS y muchas más.
- ★ Baja conductividad térmica que reduce las molestias en boca por los cambios de temperatura.
- ★ Libre de Berilio para seguridad en el laboratorio y del paciente.

Composición

Propiedades

	%
Ni	61
Cr	25.8
Mo	11
Si	1.5
W	<0.5
Al	<0.4

Temperatura de fundición	1325 – 1350 °C
CTE 25 – 500 °C	13.8 µm / m-K
CTE 25 – 600 °C	14.4 µm / m-K
Densidad	8.2 g / cm ³
Dureza	185 HV 10
Resistencia a la tensión	550 N / mm ²
Módulo de elasticidad	115 GPa

Solicite el instructivo de uso.

DENTSPLY LAB

Tel. (55) 5587 6488 ext. 248

01800 716 6779

www.dentsply.com.mx



Star Loy N'





kuraray *Noritake*



Guadalajara (33) 3833-0333
Mexico, D.F. (55) 5547-4747
01 800 3637 800
mdc@dental.com.mx

www.dental.com.mx