

técnica dental


Enero-Febrero No. 77 / 2013

México \$50 pesos

www.tecnica dental.com

INSPIRACIÓN DE LO NATURAL

Mecánica, función y estética

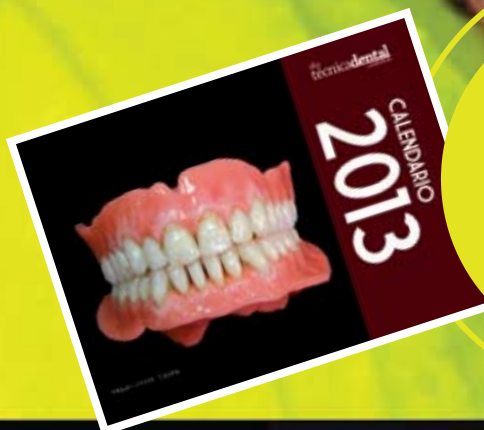

Consigue tu
Calendario
2013

-Con **Circonio** tus trabajos son

Sencillos, fáciles y espectaculares

-Elabora tus **modelos**

con la técnica de bardeo

-**Diseño** de Sonrisas

mínimamente invasivas

Fotografía: Angel García de la Fuente



1ER. ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES, PRÓTESIS FIJA Y ESTÉTICA
8 y 9 de Marzo



tecnica dental.com

EL EVENTO MÁS ESPERADO EN EL MUNDO DENTAL

Evento Exclusivo organizado por:

técnica dental
LA REVISTA

8 Y 9 MARZO 2013



EXPO REFORMA, CIUDAD DE MÉXICO

Conferencistas

Dr. Fidel Sotelo, México
Dr. Francisco Cabrera, México
MDT. Germano Gritti, Italia
MDT. Mauro Sant, Suiza
Dr. Nestor Schejtman, México

Dr. Onan Martínez, Venezuela
MDT. Peer Kulzer, Alemania
MDT. Pere Baldomà, España
TPD. Roberto González, México
MDT. Thomas Graber, Suiza

1ER. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES, PRÓTESIS FIJA Y ESTÉTICA

EVENTO PARA ODONTÓLOGOS, IMPLANTÓLOGOS, PRÓTESISTAS Y TÉCNICOS DENTALES

ESTÉTICA, FORMA Y COLOR

- Diagnóstico
- Toma de impresiones
- Encerado de diagnóstico
- Guías protésicas y quirúrgicas
- Prótesis fijas sobre metal
- Prótesis atornilladas y removibles
- Prótesis a base de zirconia, cerámica libre de metal y acrílico, cuándo usar cuál y bajo qué consideraciones

Informes: 5523.6107 / 5543.0499 / 5523.3763. Lada: 01800.633.7400
tecnicadental.com/encuentro-fija



“Las palabras convencen, el ejemplo arrastra”

Al empezar un nuevo año solemos plantearnos determinados objetivos o grandes proyectos acompañados de estrategias para lograrlos, por ejemplo, los que somos padres nos renovamos para implementar nuevas actividades además de disciplina en el hogar; los que somos empresarios, ya sea técnicos u odontólogos, hacemos remodelaciones en nuestros laboratorios o consultorios y lógicamente en nuestras listas de precios.

Sin embargo, más que una renovación externa, sería bueno hacer una autoevaluación de nuestras metas a alcanzar durante el año que concluye con el fin de analizar tanto nuestros logros como fracasos, sobre todo si ellos se debieron a la falta de consistencia, estrategias incorrectas o cambio de intereses.

Te propongo un ejemplo: A principios del 2012 decidiste ofrecer la elaboración –colocación de prótesis e implantes en tu laboratorio o consultorio pero a pesar de tu intención, la falta de tiempo o una buena capacitación obstaculizaron tu éxito, entonces hoy te preguntas: “¿Qué debo hacer para Enero?” Desde luego primero observar que el mercado se dirige con rapidez hacia ese objetivo y entonces retomarlo con un nuevo enfoque: nutrirte de posibilidades, es decir, busca capacitarte con diplomados, cursos, congresos, libros, revistas. Una vez que tengas esa lista deberás analizar costos, lugar, tiempos, material, perfil de ingreso (grado de estudios, experiencia) y perfil de egreso (elementos que obtendrás). Posteriormente llama o ponte en contacto para ampliar tu información porque en ocasiones hay factores no considerados en un primer momento. Te recomiendo hacer todas las preguntas necesarias sin dejar algo sobre entendido, créeme después se convierten en obstáculos difíciles de sortear.

Ahora bien, la evaluación de riesgos y ventajas es indispensable antes de emprender cualquier meta ya que si son imposibles de cumplir sólo lograrás desilusionarte y perderás el entusiasmo por crecer, peor aún te irás rezagando en tus funciones laborales, profesionales, familiares o sociales. En ese sentido, la “autogestión” será tu gran aliada, es decir, deberás apartar las horas o días en tu agenda de tal manera que SÓLO eso te mueva: el requisito principal para el éxito es comprometerte a recibir una excelente capacitación, entonces de preferencia da el anticipo así no te traicionará la inercia de mantenerte en tu “zona de confort”, sino que una vez decidido darás los pasos necesarios para triunfar, el más difícil es el primero pero las mismas actividades te animarán a seguir adelante.

De esta manera te he dado a conocer a grandes rasgos cómo trazarte metas realistas, generar un sistema para alcanzarlas; evaluar las circunstancias que enfrentarás y sobre todo la autogestión para crecer en todos los sentidos de tu vida hasta disfrutar ahora sí, el éxito.

Si el ejemplo de estar al día como técnico u odontólogo en el tema de rehabilitación a base de implantes te agrada, entonces puedo contribuir contigo invitándote al Primer Encuentro Internacional De Prótesis Sobre Implantes, Prótesis Fija y Estética, a llevarse a cabo los días 8 y 9 de marzo. Está dirigido a profesionales como tú, por favor pide informes y verifica la conveniencia de tu asistencia. Todo el equipo de Alta Técnica Dental nos estamos esforzando por cubrir tus necesidades al máximo.

Si lo prefieres consúltame, con gusto te daré toda la información requerida. Asimismo me pongo a tu disposición para cualquier asesoría respecto a otra meta que decidas emprender, sin costo alguno.



¡Atrévete y ponte a prueba, te aseguro que los resultados te harán sentir muy bien!

T.P.D. Alma Argüello.


editora
alma@tecnicadental.com

Nuevo Cercon® ht


Zirconia para coronas y puentes completos



Cercon® ht es la nueva zirconia con alta translucidez (ht) que permite lograr restauraciones posteriores de contorno completo con apariencia natural y respeta los dientes antagonistas.

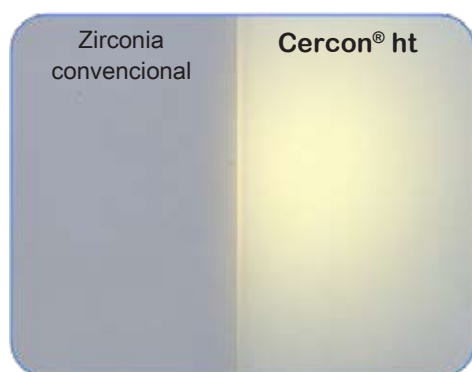

Cercon® ht tiene alta translucidez

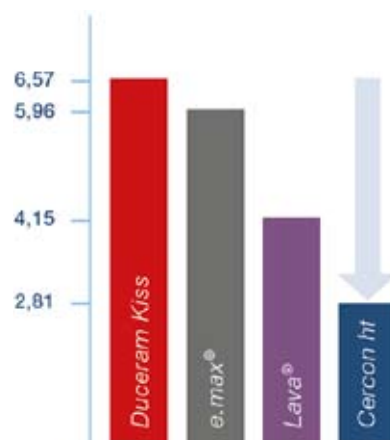

Cercon® ht es 40% menos abrasiva que el metal-porcelana o la cerámica prensada*.

*Fuente: Universidad de Regensburg, 2011.

Procedimientos Sencillos. ¡Excelentes resultados!

cercon
smart ceramics



Diseñamos la corona o puente completo de acuerdo a sus instrucciones y damos el tono base.

La corona está lista para ajustes en boca




Aplique el glaseador Cercon® Ceram para lograr el brillo final.

Si fuera necesario puede pulir la superficie



Caracterice con los tintes Cercon® Ceram.

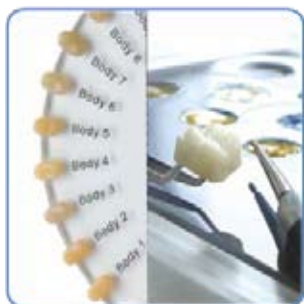

**Cercon® Ceram
Stains & Glaze**

Tiene una gran variedad de tintes y glaseador para obtener el tono y caracterizaciones deseados en la zirconia.

Cercon® ht puente 45-47

Preparación conservadora. Puente posterior de contorno completo caracterizado con Cercon ceram stains



Servicio a técnicos dentales todo el país.

Centros Cercon® en México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Tijuana

Para mayor información llame a:

Cercon® LAB: 5587-6488 ext 275

DENTSPLY México. S.A. de C.V.
Calz Vallejo 846. Ind. Vallejo
México DF, 02300

For Better Dentistry

DENTSPLY

Editorial

3 | Carta Editorial

ATD Recomienda

- 10 | Libro: Fundamentos de Prostodoncia Total
- 10 | DVD: "El Legado de un Maestro" / Norberto Torres
- 10 | Web: Blog de Pere Baldomà
- 10 | Evento: 1er. Encuentro Internacional de Prótesis sobre Implantes, Prótesis Fija y Estética.

Empresarios Dentales

16 | Comunicación honesta, asertiva y respetuosa

Tips Prácticos

21 | Elaboración de los modelos de trabajo en prostodoncia total, mediante la técnica de bardeo o encajonado.

De los Expertos

- 31 | Prótesis combinada con conexión rígida
- 36 | Diseño de sonrisas, mínimamente invasiva

De Portada

45 | Inspiración de lo natural, Mécanica, función y estética

Entrevista

50 | Vita en México con atención personalizada

ATD te Informa

- 55 | Distribuidores Estrella
- 56 | Calendario de Cursos y Conferencias
- 58 | Subasta Dental


COLABORADORES EN ESTE NÚMERO

DR. GIACOMO STORNO (Italia)
DR. LUCA VENUTI (Italia)
T.P.D. CLAUDIO LENZARÍN (Italia)
DR. FRANCISCO CABRERA NEGRETE (México)
T.P.D. PAULINA LEIJA (México)
D.G. MARCO TIEMAN (México)
T.C.D. FERNANDA CASOLLA (México)
C.D. ALFREDO MERINO (México)
T.C.D. ARTURO OLIVARES (México)
T.P.D. ALMA DELIA ARGÜELLO GONZÁLEZ (México)
T.P.D. JORGE ARGÜELLO GONZÁLEZ (México)
T.P.D. ANGEL GARCÍA DE LA FUENTE (México)

Patrocinadores:

IVOCLAR, ZHERMACK, PARTIAL FLEX, NEW DENTAL, MDC DENTAL, DENTSPLY, ZIRKONZAHN, VACIADOS DENTALES XOLA, ESTUDIO ODONTO-TÉCNICO, MART-DENTAL, JOPER DENTAL, DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTES, ZIRKONIUM YZR, MOLIDENT, DIGIMAX SYSTEM, DENTAL B&K, DENTAURUM, DENTAL DE WINTER, NEW DENTAL, IDEAS DENTALES, CENTRO PROFESIONAL DE FRESADO, HERAEUS, VITA.

DE PORTADA

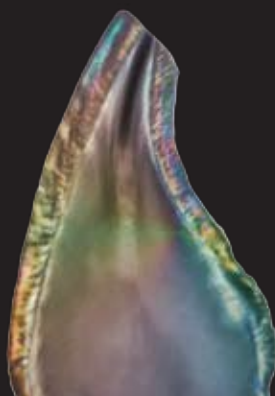

PÁGINA: 45

Inspiración de lo Natural
Mecánica, función y estética



PÁGINA: 16

Comunicación
Honesta, asertiva y
respetuosa



PÁGINA: 31

Prótesis Combinada
con conexión rígida



PÁGINA: 36

Diseño de Sonrisas
mínimamente invasivas

DIRECTORIO

DIRECCIÓN GENERAL

T.P.D. Jorge B. Argüello Hdez.
direccion@tecnica dental.com

SUBDIRECCIÓN Rosa González Villegas

DIRECCIÓN EDITORIAL Y COMERCIAL T.P.D. Alma Delia Argüello González
alma@tecnica dental.com

DIRECTOR CIENTÍFICO T.P.D. Jorge E. Argüello González
jorgealtatecnica@yahoo.com.mx

FINANZAS C.P. Francisco Rodríguez Mendoza

VENTAS Maritza Martínez Camacho
maritza@tecnica dental.com

DISEÑO EDITORIAL Ma. Del Pilar Varela Rodríguez
pilar@tecnica dental.com
Alma D. Argüello González
alma@tecnica dental.com

REDACCIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO Lic. Verónica Viñuela Gómez
veronica@tecnica dental.com

DISEÑO PUBLICITARIO Abraham Jair Avendaño
abraham@tecnica dental.com

FOTOGRAFÍA T.P.D. Angel García de la Fuente
angel@tecnica dental.com

WEB MASTER Eduardo Viñuela Gómez
web@tecnica dental.com

COLABORACIÓN CIENTÍFICA GRUPO PROMETEO INTERNACIONAL
T.C.D. Alberto Hernández
T.C.D. Arturo Olivares Fuentes
T.C.D. Carlos Alejandro Mayorga
T.P.D. Jorge Argüello González
T.C.D. José A. Sierra Ortiz
Dr. Rubén Bernal Arciniega
Dr. Carlos A. Mora García
C.D. & T.C.D. Carlos Daniel Mora García
C.D. & T.C.D. Jorge Montes de Oca C.
T.P.D. Alejandro Cadalso Oqueli

suscripciones: (55) 55236107 / www.tecnica dental.com

Revista bimestral Enero-Febrero 2013
Editora responsable: Alma Delia Argüello González.
Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo del título: 04-2010-030418381300-102
Certificado de licitud del título y contenido: 15540
Expedido por la Secretaría de Gobernación.
ISSN 1870_5626.
Registro Postal por SEPOMEX: PP09-1593.
Domicilio de la publicación: Av. Colonia del Valle 818, Col. del Valle, C.P. 03100. México D.F. Tels: 5523-6107, 5543-0499, 01800-6337400.

Alta Técnica Dental no se identifica necesariamente con las opiniones expresadas libremente en sus páginas por los colaboradores. Las ofertas promociones y contenido de los anuncios son total responsabilidad de los anunciantes. Queda estrictamente prohibida la reproducción parcial o total del contenido por cualquier medio incluyendo los magnéticos y electrónicos sin previa autorización por escrito de los editores. Nos reservamos el derecho de proteger nuestra propiedad intelectual en todo el mundo.

Queda estrictamente prohibida la reproducción parcial o total de cualquier diseño publicitario realizado por parte de Alta Técnica Dental para los patrocinadores, sin previa autorización por escrito de los editores.

Nueva generación de siliconas para profesionales

edge

Silicón de masilla por adición



Aplicaciones:

- Llave para guía de espacios en el montaje de porcelana
- Contramufa en el proceso del acrílico en prótesis
- Matriz guía de control para el proyecto de la estructura metálica
- Reparación de prótesis removibles
- Montaje de registro oclusal para el articulador
- Llave para elaboración de puentes y coronas provisionales temporales
- Guía y soporte para realizar elaboraciones extensas
- Dureza final: 90 Shore A

Relación 1:1



Silicón fluido por adición



Aplicaciones:

- Para duplicar modelos en PPR con o sin aditamentos
- Para duplicados de investimento refractario en la elaboración de carillas
- Utilizar mufas para duplicar en plástico transparente
- Dureza final: 28 Shore A

Relación 1:1



 **MDC**[®]
DENTAL

Gdl: (33) 3833-0333
Mexico, D.F. (55) 5547-4747
01 800 3637 800

mdc@dental.com.mx

www.dental.com.mx

LIBRO



Vista de los ligamentos intrínsecos



Fundamentos de Prostodoncia Total

- Principios de prostodoncia y gerodontología
- Anatomofisiología de la edentación
- Rehabilitación y tratamiento protésico
- Propedéutica prostodóntica clínica

Autores: José Osawa Deguchi
José Luis Ozawa Meida
423 páginas

Costo: \$320.00 más gastos de envío

Todos estos productos los puedes conseguir
llamando al 55236107 o al lada sin costo
01800-633-7400

DVD

Norberto Torres "El legado de un Maestro"

Recopilación de 40 artículos en PDF



42 años
de experiencia
de un Maestro

México



CD-ROM

WEB

Pere Baldomà
Dental Aesthetics
Blog

En este blog podrás exponer dudas, inquietudes y comentarios, que te hagan mejorar en tu trabajo diario dentro de tu profesión como Odontólogo y Protésista Dental.

perebaldoma.blogspot.com

EVENTO

EL EVENTO MÁS ESPERADO EN EL MUNDO DENTAL

8 Y 9 MARZO 2013

Evento Exclusivo organizado por:

técnicadental
LA REVISTA



EXPO REFORMA, CIUDAD DE MÉXICO

1ER. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES, PRÓTESIS FIJA Y ESTÉTICA

EVENTO PARA ODONTÓLOGOS, IMPLANTÓLOGOS, PRÓTESISTAS Y TÉCNICOS DENTALES

- Diagnóstico
- Toma de impresiones
- Encerado de diagnóstico
- Guías protésicas y quirúrgicas
- Prótesis fijas sobre metal
- Prótesis atornilladas y removibles
- Prótesis a base de zirconia, cerámica libre de metal y acrílico, cuándo usar cuál y bajo qué consideraciones

ESTÉTICA, FORMA Y COLOR



Informes: 5523.6107 / 5543.0499 / 5523.3763. Lada: 01800.633.7400
tecnicadental.com/encuentro-fija

tecnicadental.com/eventos/encuentro-fija

Expo Reforma Ciudad de México Conferencistas

MDT. Thomas Graber, Suiza
MDT. Mauro Sant, Suiza
Dr. Jorge Izaza, Colombia
Dr. Néstor Schejtman, México
Dr. Francisco Cabrera, México
Dr. Fidel Sotelo, México
MDT. Pere Baldomà, España
MTD. Dr. Onán Martínez, Japón
MDT. Peer Kulzer, Alemania
T.P.D. Roberto González, México

Aquí aprenderás a diagnosticar qué tipo de implante conviene colocar en cada caso, cómo hacer una planeación exitosa, qué tipo de prótesis es la adecuada apoyados en las nuevas tecnologías digitales y los nuevos materiales y técnicas libre de metal.

Conocerás novedosas tendencias y sorprendentes métodos que te permitirán desarrollarte como un profesional de la implantología, la prótesis fija y la estética.



Evento avalado con 16 horas de crédito
por la Facultad de Odontología de la UNAM



DE 1 / DE 2

Hornos de desecnerado con programa único en dos tiempos

Características*

Sistema de calentamiento tradicional mediante 4 placas



Ventajas

Encendido retardado: posibilidad de programar la hora de encendido del horno

Microinterruptor electrónico: interrumpe la alimentación eléctrica de las resistencias en caso de apertura de la puerta



Precalentamiento de todos los revestimientos en forma fácil y rápida

Temperatura máxima de funcionamiento 1100 °C



Carcasa exterior completa altamente resistente



DM 30 / DM 40

Hornos digitales de desecnerado multi-programa

Características*

Sensor térmico y control electrónico de la temperatura de última generación



Ventajas

Gran precisión en la lectura de la temperatura. Apagado automático de la resistencia eléctrica en caso de avería

Cámara con resistencias eléctricas de gran calidad revestidas con tubos de alúmina (temp. máx 1100°C)



Homogeneidad en el calentamiento y obtención de la temperatura máx. en poco tiempo. Bajos consumos de energía eléctrica

Software multifuncional de 10 programas con 4 fases y "FAST", encendido programado en DD/H/MIN. y incremento térmico de 30°C/min



Precalentamiento de todos los revestimientos en forma fácil y rápida



*Para más información sobre las características técnicas y prestaciones de la apartología, consulte en la web es.zhermack.com

IMPORTADOR

Balsas DENTAL
Innovación, Calidad y Servicio... compromiso de Satisfacción.

Tajln 110 Col. Narvate C.P. 03020. Del. Benito Juárez México. D.F.
Información: Tel.: 01(55)-5672-2830 . Sin costo: 01800-111-2257
<http://www.balsasdentalmx.com/BD/Zhermack.html>

Zhermack®
BEYOND INNOVATION

Visite nuestro sitio web: es.zhermack.com

PROMOCION

GEMINI^{LT}
La nueva generación
shenp^z
electr^otherm group

12
MESES

- Mufla CAT para un funcionamiento preciso.
- Distribución de calefacción totalmente uniforme.
- Temperaturas muy precisas en los niveles bajo, medio y alto.
- Mejora la productividad con el enfriamiento de alta velocidad.
- Con material Kantal spiral durable hasta 1180°C (2156°F), con transferencia de calor entre 10-120°C (50-248°F)/min.
- Piezas de refacción originales en stock.
- Técnicos calificados disponibles.
- 30 meses de garantía.



Como la tecnología de Gemini LT Twin-Table puede aumentar la capacidad de trabajo

Una característica única es las dos mesas giratorias programables, que optimizan la productividad al ahorrar valioso tiempo de preparación

- le permite programar una segunda cocción antes de que el primero haya terminado
- dos ceramistas pueden trabajar simultáneamente, cada uno en su propia mesa de cocción
- le otorga completa libertad de movimiento, mientras que el trabajo está en curso - no hay necesidad de esperar al lado del horno



Gdl: (33) 3833-0333
Mexico, D.F. (55) 5547-4747
01 800 3637 800
www.dental.com.mx
mdc@dental.com.mx



Rogson[®] Wax



*La cera mexicana
más vendida en el mundo*

- Fácil uso
- No es pegajosa
- Excelentes propiedades para contornear
- Mantiene los dientes firmemente
- Encerado rápido y eficiente
- Extraordinaria para casos a prueba
- Descerado limpio y sin residuos

• Presentación 1/2 lb y 5 lbs

Disponible en los siguientes tipos



- Cera media toda estación (Rosa)
- Cera dura (Rosa)
- Cera extra dura (Rosa)
- Cera suave para rodillos (Rojo)



Gdl: (33) 3833-0333
Mexico, D.F. (55) 5547-4747
01 800 3637 800



Amplio articulador para el montaje correcto de los modelos dentales

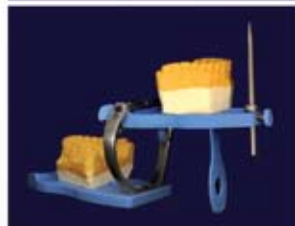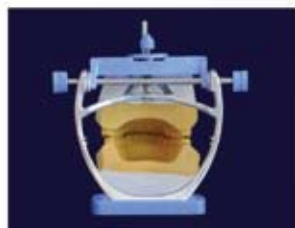

- Extraordinaria visión pósterio-anterior hacia los modelos, por su parte lingual y palatal.
- Doble soporte del bastago anterior y tornillo posterior para poder retirar el vastago incisal y poder trabajar en la parte anterior.
- Base para montaje de los dientes superiores con guías de referencia para el montaje de los dientes.
- Vástago incisal graduado sobre guía anterior angulada.
- Permite múltiples montajes debido a sus platinas magnéticas.
- Guías perforadas en la parte interna de ambas ramas del articulador.
- Soporte de descanso para rama superior en apertura.
- Movimientos de protrusión y retrusión; así como, lateridades.



Variedad de colores



Gdl: (33) 3833-0333
Mexico, D.F. (55) 5547-4747
01 800 3637 800

mdc@dental.com.mx

www.dental.com.mx

Igualamos la Naturaleza



NIC TONE®



Técnica Tono Tisular



Sistema de acrílado cromático para prótesis personalizadas con tonalidades de máxima naturalidad.



Gdl: (33) 3833-0333
Mexico, D.F. (55) 5547-4747

01 800 3637 800

mdc@dental.com.mx

www.dental.com.mx

"Los mejores productos para las mejores Prótesis Removibles"

Preparación del trabajo



Cera para Rebasado
roja 0,5mm 15 hojas
Clave 120-105-00
\$365.00



Cera para bloqueo
rosa, lata 50 grm.
Clave 110-310-00
\$360.00



Gumex N Plastilina
a base de cera, 650 grm.
Clave 168-015-50
\$365.00

Cursos Removibles 2013:

**Febrero 14 y 15
Abril 18 y 19
Junio 20 y 21**

Ponente: Dr. Ruben Bernal

Duplicar y Endurecer




Pasta duplicadora
dubliform (6 kg.)
Clave 108-500-00
\$920.00



Rema Exakt revestimiento
20kg. (50 x 400g.)
Clave 105-020-00
\$1,500.00



Líquido Rema
Exakt 1ltr.
Clave 105-501-00
\$270.00

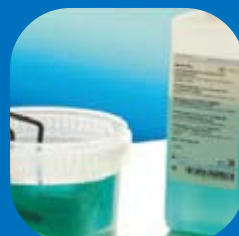

Líquido Remadur
Endurecedor en frío 1ltr.
Clave 167-301-00
\$420.00

Modelado en Cera



Cera lisa verde
0,4mm 15 hojas
Clave 114-440-00
\$240.00



Rejillas preformadas
RN III 20 hojas
Clave 110-103-00
\$475.00



Cera verde veteada
0,5mm 15 hojas
Clave 117-150-00
\$240.00



Ganchos molares
MK 200 piezas
Clave 110-002-00
\$325.00



Hilo de cera en barras
0,8mm 25grm
Clave 111-108-00
\$365.00

Precios NO incluyen IVA.

"NUEVO TRAINING CENTER DENTAURUM EN MEXICO DF SUPER EQUIPADO, COMENZAMOS EN FEBRERO"

CURSOS DE PROTESIS FIJA EN ALIANZA CON:



01800 300 3009 0155 5785 6755
www.vita.com.mx



5672 2830 01800 111 2257
www.balsasdentalmx.com



5203-3817 5203-3806
www.depositodentalbyk.com



Febrero 7 y 8 • Mayo 30 y 31

Tels.: 5250-0450, 5250-3378, 5255-4542

info@cdewinter.com

www.cdewinter.com

“Los mejores productos para las mejores Prótesis Removibles”

Revestido



Hilo de cera en rollo
3.5 mm 250grm.
Clave 111-835-00
\$300.00



Conos para colados
de plástico pza.
Clave 110-201-00
\$4.00



RK 3 Revestimiento
fino 150gr
Clave 104-501-50
\$270.00



Cinta de papel
engomadas para
cilindros 100 hojas
Clave 127-100-00
\$250.00



Rema Exakt
revestimiento
20kg. (50 x 400g.)
Clave 105-020-00
\$1,500.00



Líquido Rema
Exakt 1ltr.
Clave 105-501-00
\$270.00

Colado



Metal Remanium 800 (1 kg.)
en Lingote, libre de Berilio
Clave 102-200-10
\$4,000.00



Arenado



Oxido de aluminio blanco 250 micrones
Clave 128-011-00
10 kilos **\$1,200.00** y 1 kilo **\$150.00**



Tallado



Piedras abrasivas
marron pza.
Clave 132-203-00
\$15.00

Abrillantado y Pulido



Líquido
electrolítico 1 ltr.
Clave 128-301-00
\$350.00




Pulidor de goma verde
rueda o punta pza.
Clave 138-101-00
\$10.00



Pasta abrasiva y de
pulir, blanca 250grms
Clave 190-300-00
\$100.00



Terminado

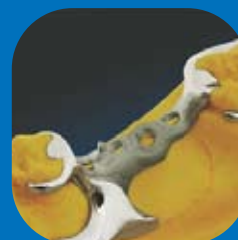

Precios NO incluyen IVA.

CURSO EN DENTAURUM ALEMANIA DEL 18 al 22 de MARZO DE 2013,

“Microfresado con aditamentos, Elaboración de Removable y elaboración de Prótesis Fija”

Adios Vera!

NUEVA ALEACIÓN PREMIUM
CON TITANIO PARA RESTAURACIONES
METAL - CERÁMICA

Superior que VeraBond!...
y al mismo precio

- Alta resistencia flexural
- Más blando que los de su tipo
- Mejor estabilidad dimensional
- Bio compatibilidad por contener titanio
- Compatible con todas las porcelanas



COMANDIUM

COMANDIUM II
Formulacion libre de Berilio

AalbaDent

 **MDC**[®]
DENTAL

Gdl: (33) 3833-0333
Mexico, D.F. (55) 5547-4747
01 800 3637 800

www.dental.com.mx

Attachments para prótesis

RHEIN83[®]



- ESTETICAS
- FUNCIONALES
- DE ALTA CALIDAD

COMBINADAS: FIJAS Y REMOVIBLES
Tecnología y diseño Italiano

 **MDC**[®]
DENTAL

Gdl: (33) 3833-0333
Mexico, D.F. (55) 5547-4747
01 800 3637 800
mdc@dental.com.mx

www.dental.com.mx

· SURTIDO EN REPUESTOS

Diseño de Sonrisas mínimamente invasiva



DISEÑO DE SONRISA

TCD. Fernanda Casolla, (México)

CD. Alfredo Merino Salas, (México)

Master Ceramist Arturo Olivares Fuentes (México)



Esta es una técnica de tratamiento odontológico cuyo objetivo principal es mejorar notablemente la armonía y la estética en la sonrisa del paciente, sometiéndolo al menor desgaste dentario posible durante el proceso de rehabilitación.

Principalmente estas carillas reconstruyen bordes incisales, diastemas, giroversiones o alguna otra mala posición de los dientes naturales, lo cual aumenta en gran medida la autoestima del paciente, al recobrar tanto aspectos funcionales como relaciones sociales. Este tipo de restauraciones pueden manejar espesores mínimos de .3mm a .5 mm, por ello resulta tan importante contar con un material que nos proporcione las principales características de la naturaleza como lo son la opalecencia, la translucidez y fluorescencia, entre otros.

A continuación mostraré tres casos clínicos los cuales mejoraron notablemente como consecuencia de una buena planeación en el diseño de los chips estéticos. Para su confección elegí la cerámica vintage MP de la casa comercial "Shofu" debido a los incisales opalescentes que manejan y a su amplia gama indicada para reconstruir los incisales dentales de manera que logren incorporarse con mayor naturalidad.

CASO 1

Paciente masculino de 26 años de edad, con deseos de obtener armonía en la sonrisa debido a que sus laterales superiores presentan formas cónicas carentes de línea estética. (Foto. 1). Aspecto inicial (Foto 1 y 2).



Fotos 1 y 2.

Debido a la poca longitud de los laterales el paciente percibe los dientes centrales y caninos demasiado largos, para solucionar esto, las carillas (Press-Less) (Foto 3) fueron la opción elegida. Necesitamos alargar los bordes incisales de los laterales, es por eso que decidimos utilizar la técnica de cerámica estratificada sobre un modelo hecho en material refractario. (Foto 4).



Foto 3.



Foto 4.

Se prepara el modelo refractario y se hidrata para comenzar el montaje de la cerámica. (Foto 5).

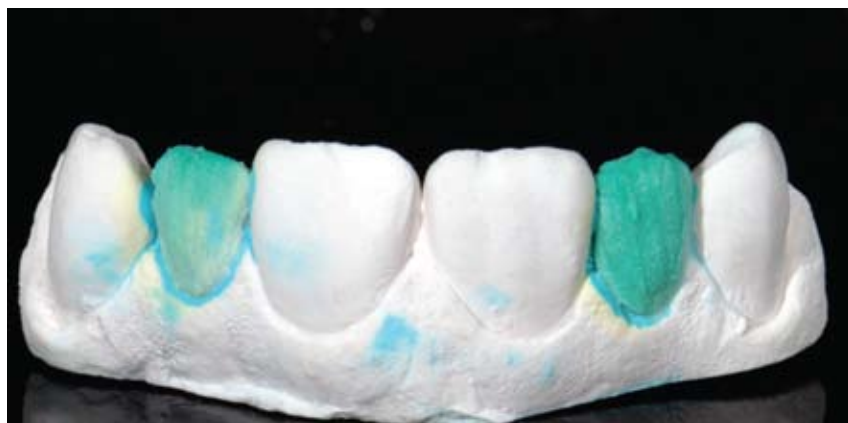


Foto 5.

Para la primera cocción se aplicó una delgada capa (wash) del color tomado previamente al paciente A2, para hacer la transición del diente hacia la carilla e identificar posteriormente los efectos incisales. (Foto 6)



Foto 6. Vista después de la cocción.

Es muy importante que las cocciones de la cerámica sobre material refractario se hagan a 30°C encima de la temperatura indicada por el fabricante de la cerámica, pues el yeso refractario absorbe mucho calor mientras que en caso contrario, dejaría la porcelana cruda perdiendo las propiedades vítreas de la cerámica.

Posteriormente se coloca sólo sobre el borde incisal WE (White enamel) y OE 58 (Opal enamel 58) mezclados en proporción 50% / 50% para recrear el borde translúcido y opalescente del paciente. (Foto 7).



Foto 7. Después de la cocción.

En seguida se recubre todo con T glass. Esta es una masa altamente translúcida para darle profundidad a la carilla y se integre mejor con el diente natural. (Foto 8).



Foto 8.

Es muy importante colocar capas delgadas de cerámica guiándonos con los dientes adyacentes para no sobrecontornear los laterales y dejarlos fuera de arco. (Foto 9).



Foto 9. Vista de las carillas recién salidas de la segunda cocción.

Guiándonos con los centrales, se comienza a dar anatomía y forma a los laterales, es muy importante tomarnos invertir suficiente tiempo en el tallado; no debemos olvidar que las carillas son muy delgadas. El devastado y la textura se realizan con fresas de diamante sinterizado. (Foto 10).



Foto 10. Vista de las carillas después del glaze.

Se procede a recuperar con el arenador las carillas utilizando perlas de vidrio con cuidado de no dañarlas.



Foto 11. Las carillas recuperadas y adosadas



Foto 12. Para el cementado solo se coloca el ácido grabador al diente y se procede de manera convencional



Foto 13. Carillas ya cementadas.

Lo importante de manejar la cerámica con incisales de alta translucidez es lograr que se incorporen al diente natural y pasen desapercibidas logrando la mayor naturalidad posible. (Foto 14).



Foto 14. Integración y armonía



Foto 15. Integración y armonía.

Caso 2

Paciente masculino de 25 años que tras un accidente automovilístico sufrió la fractura de los bordes incisales de 11 y 21. El Dr. Alfredo Merino llevó a cabo una preparación mínimamente invasiva con el fin de darles soporte a las carillas y otorgarles el mayor tejido dentario posible. Se concluyó que tendríamos mayor naturalidad en el borde incisal por las propiedades opalescentes de la cerámica Vintage MP, gracias a los efectos que nos ofrece el sistema para reproducir el diente natural. (Foto 16).

Guía de opalescentes MP vintage (14)

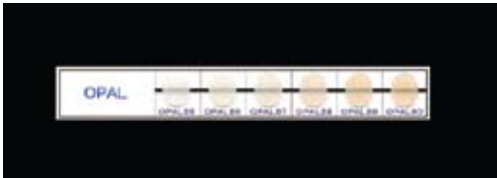


Foto 16.

Se procedió al montaje de las carillas refractarias, utilizando en la primera cocción la dentina A2 para hacer una capa uniforme y lograr la transición de la carilla para con el diente natural. (Foto 17).



Foto 17.

La siguiente masa utilizada (aquí en rosa) corresponde al efecto WE que le confiere el efecto blanco en el diente. (Foto 18).



Foto 18.

A continuación en el medial y distal se colocó opal 55 acentuando en esta zona mayor luminosidad (en naranja) y en el tercio medio, opal 59 que es más oscuro para darle calidez (de color azul). (Foto 19).



Foto 19.

En el borde incisal se colocó T glass para recubrir los efectos y lograr mayor profundidad (color morado). Finalmente se colocó en el borde para cerrar el halo opal 60. (Foto 20).

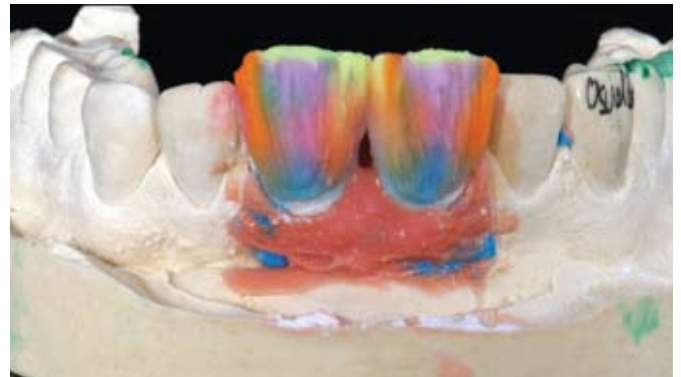


Foto 20.

Una vez cocidas se les confiere forma y textura. Se recuperan las carillas con perlas de vidrio a 3 bares. Para concluir se procede al cementado por adhesión, similar al caso anterior. (Foto 21).



Foto 21. Aspecto de las carillas cementadas.

Gracias a la técnica de estratificado se puede apreciar la luminosidad de la restauración y como se integra de manera espectacular en boca, de allí mi preferencia a utilizar masas transparentes como lo es el T glass para lograr mayor profundidad en el tercio medio e incisal. Como recomendación sugiero no abusar de la masa pues si no la utilizamos con el White Enamel corremos el riesgo de que la restauración tienda a gris por su bajo color.

Es muy importante conocer la anatomía del segmento anterior para lograr una perfecta integración de las carillas en boca, de lo contrario una excelente técnica de estratificado se verá opacada por una mala anatomía y textura. Esta vista de perfil nos permite apreciar la naturalidad con la que se incorporaron las carillas (Foto 22).



Foto 22.



Foto 23. Brillo y textura armónicos.

Caso 3

Paciente femenina de 45 años que sufrió trauma en el O D 21 (Foto. 18); saldría de viaje al día siguiente, de allí la urgencia con la que teníamos que resolver el caso cubriendo aspecto estético, resistente y funcional. (Foto 24)



Foto 24.

Se decidió elaborarlo en silicato de zirconio CERAMAGE, debido a que este cerómero de matriz de zirconio nos aporta una gran resistencia y estética. Se cuenta con una amplia gama de masas para personalizar la restauración (Foto 25).



Foto 25.

Sistema óptimo para restaurar segmentos anteriores al tener fluorescencia idéntica al diente natural, además de propiedades opalescentes (Foto 26).



Foto 26.

Este sistema es muy sencillo de utilizar y nos permite acortar sustancialmente el tiempo de elaboración sólo con 4 masas.

Se coloca en primera instancia el espaciador evitando llegar al área de sellado (27) y esperamos a que seque perfectamente, después colocamos fluid en A 2(28) para asegurar un sellado perfecto, luego colocamos dentina A2 pero sin llegar a la forma total del diente (29), a continuación tomamos la masa HVT high value translucent y recubrimos el borde incisal (30); para finalizar lo recubrimos con T glass para lograr profundidad (31).

Se fotocura durante 5 minutos y se procede al pulido mecánico con las pastas correspondientes.

Posteriormente el chip está listo para ser colocado.



Foto 27.



Foto 28.



Foto 29.



Foto 30.



Foto 31.

La restauración una vez colocada se integra de manera homogénea al O D sin evidenciar una línea de transición.

Debemos tener muy presente que en estos casos no sólo estamos rehabilitando el diente sino también la autoestima y la seguridad del paciente, de allí la importancia de dedicarle el tiempo necesario a nuestro trabajo.

Un agradecimiento especial al MDT. Arturo Olivares, al Dr. Alfredo Merino y a Seprolab por el apoyo otorgado.

Contacto CREACION DENTAL
Mail: casollacreativ@hotmail.com

¡Suscríbete a la revista!

alta técnica dental

Durante el mes de
enero y recibe GRATIS
tu calendario anual

2013

**Costo anual de la
Suscripción
Impresa \$300
Digital \$250**



Entra a nuestra página: www.tecnica dental.com/tienda

y adquiere la suscripción digital o si quieres la revista impresa realiza el pago por \$300 pesos en el banco de tu preferencia a nombre de:

ARGOZ DENTAL, S.A. DE C.V.

HSBC 4039319553

BANCOMER 0154- 713729

BANAMEX 0283-4237132

Y envía la ficha de depósito por fax al: **55430499** ó al **01800-633-7400**

Junto con todos tus datos o escanéala y envíala a:

suscripciones@tecnica dental.com

Tu suscripción inicia en cuanto salga a la venta el siguiente
número después de la recepción de tu pago

Informes: 5523.6107 / 5543.0499 / 5523.3763. Lada: 01800.633.7400

THERMOFLEX™

Acetal Resin

ThermoFlex™ es una resina Acetal de grado farmacéutico de alta calidad diseñada para la fabricación de prótesis removibles flexibles resistentes y ganchos con topes oclusales.

Estética

Disponible en tonos "V" y rosa. Puede hacerse las prótesis removibles en tono similar a los dientes naturales logrando mayor aceptación de los pacientes.

Duradera

Alta resistencia a la abrasión y fracturas lo vuelven el material preferido de larga duración. El dentista puede hacer ajustes fácilmente en su consultorio.

Flexible

Excelente resultado hasta en casos muy complicados. Su memoria elástica le permite llegar a zona muy retentivas y mantener la estabilidad de la prótesis.

Versátil

Útil en todo tipo de prótesis flexible. El esqueleto y los dientes posteriores pueden fabricarse con el mismo material. Puede usarlo solo o combinarlo con parciales metálicos o de otro material.

Fácil de Usar

Presentación en gránulos. Dosifique la cantidad exacta de material que necesita. 15g para restauraciones pequeñas y 25g en puentes completos. Utilice el KIT ADAPTADOR para Success® y evite el gasto cartuchos desechables.

ThermoFlex™ se funde a 215°C durante 25 minutos. Después, inyecte siguiendo la técnica convencional.

Indicaciones:

- Esqueletos para puentes removibles
- Ganchos flexibles
- Prótesis fijas provisionales

Solicite el instructivo de uso a:

www.dentsply.com.mx/contacto.asp

Tel: 5587-6488 ext. 248

LADA: 01-800-716-6779





Centro Profesional de Fresado

Maquila de núcleos y estructuras
en Zirconio para laboratorios

- * Coronas
- * Puentes
- * Barras
- * Aditamentos e implantes
fresados en Zirconio

OFERTA

Unidad individual y
en puente

\$500.00
la unidad + IVA

Apúntate a los cursos **Gratuitos**
de cerámica sobre Zirconia

Av. Colonia del Valle 818,
Col. Del Valle, México, D.F.
Tels. 5687.8536 / 4429.0732

INTERNACIONALES

Argentina

Ar-T Dental / Juan Marcos Buda
Laboratorio Integral de Estética
Dental
www.artdental.com.ar
www.artecinvent.com.ar
E-mail: ar-tec@argentina.com
Msn: jmbuda@hotmail.com
Skype: ar-tec
Tel (0054) 114709-1950
Fax (0054) 114709-2229

Bolivia

Recedent
feliperevilla@hotmail.com
Tels:(00591)2-279-0040
La Paz, Bolivia

Chile

Carmen Magdalena
Espinoza Rivas
malena1145@yahoo.es
Tel. Movil: 41-231-2932,
9577 5284
Dirección: Casilla 3545
Concepción, Chile.

Ecuador

Dra. Graciela Machuca
Tels: (00593) 728-16-475,
0-95-11-20-54
tecnicadental_ec@hotmail.com
graciela_mahuca@hotmail.com
Cuenca, Ecuador

Panamá

Centro Especial de Prótesis
Dental Inmediata
Tels: (00507) 225-82-61

El Salvador

Corporación Dental Del Salvador
Tels: (00503) 222-20-578
San Salvador, El Salvador

Guatemala

Dep. Dental Dentimart
dentimart@yahoo.com
Tels: (00502) 24-75-2050

República Dominicana

José de los Santos
De los Santos Dental,S.A.
Santiago, República Dominicana
tel. 809-241-1342
cel. 809-430-5659
skype:de.los.santos.dental

ATD USA

Río rico 1152, Satula CT, Río Rico Arizona
Salvador Carrillo
rioricosal@hotmail.com
Tels: 631-105-7778,
520-285-99-82

Tegucigalpa, Honduras

Col. Florencia Norte
Ortencia Pérez
orte272002@yahoo.com.mx
Tel. (504)2232-4996

DISTRIBUIDORES / DONDE PUEDES COMPRAR LA REVISTA

Distrito Federal

Depósito Dental Corona
Azcapotzalco
55272402

Depósito Dental Dominguez
Iztapalapa
56862009
dddominguez@live.com.mx

Depósito Dental Cafetales
Coyoacán
56718612
cafetales20@yahoo.com.mx

Depósito Dental Chuy
Iztapalapa
57441008

Depósito Dental Guelatao
Iztapalapa
57451248
deposito_guelatao@hotmail.com

Depósito Dental Ludy
Iztapalapa
57446067
d.d.ludy@hotmail.com

Depósito Dental Yuri
Iztapalapa
57011717
ddy@live.com.mx

Depósito Dental Cabrera
Iztapalapa
57444576
dedenca@hotmail.com

Depósito Dental San Francisco
Tlahuac
38712639

Laboratorio Y Depósito Dental Jhyre
San Antonio Tecomitl
20007807
jenny_302010@hotmail.com

Depósito Dental Maden
Cuauhtemoc
55214840

Estado de México

Laboratorio Y Materiales Dentales De Oriente
Texcoco
015959523233
lmdorientee@hotmail.com

Depósito Dental Dentineza
Nezahualcóyotl
57934645
acabrerag05@hotmail.com

Depósito Dental San Jose
Nezahualcóyotl
57354351
pmo_odontologico@hotmail.com

Depósito Dental Mendoza
Chalco
30925361
erandy75@hotmail.com

Depósito Dental Egyptent
Coacalco
36874687
depositoegyptent@hotmail.com

Depósito Dental Bosques
Cuautitlan izcalli
58717126
ddbosques@yahoo.com.mx

Depósito Dental Vick Dent
Ecatepec de Morelos
57702590
vick_dent87@hotmail.com

Depósito Dental Azteca
Ecatepec de Morelos
57757160
ddentalazteca@live.com.mx

Vaciado Dental La Fundidora
Ecatepec de Morelos
56996813
lafundidora-leo@hotmail.com

Depósito Dental Depot Satellite
Naucaupan
53984557
dentaldepotsatelite@prodigy.net.mx

Depósito Dental Jireh
Atizapan de Zaragoza
58252716
depositodental_jireh@gmail.com

Depósito Dental Diproduct
Nezahualcóyotl
57836208
diproduct_1@hotmail.com

Depósito Dental Matamoros
Toluca
017222121394
ddentalmatamoros@hotmail.com

Depósito Dental Pleyadent
Toluca
017222198529
pleyadent@hotmail.com

Interior de la Rep.

Artículos Dentales de Nayarit
Tepic, Nayarit
01.311.215.59.75
bon_000@hotmail.com

Depósito Dental Agramant
Celaya, Guanajuato
01.461.616.21.39
pm.agramant@hotmail.com

Depósito Dental Azul
Querétaro, Querétaro
01.442.349.46.93
italociani@hotmail.com

Depósito Dental del Centro
Cuernavaca, Morelos
01.777.318.81.31
depositodentaldelcentro@hotmail.com

Depósito Dental Cosmodent
Uruapan, Michoacán
01.452.524.61.82
cosmodent_upn@hotmail.com

Depósito Dental C.U.
Oaxaca, Oaxaca
01.951.506.01.22
pedidos_cu@hotmail.com

Depósito Dental Davley Dental
Morelia, Michoacán
01.443.314.92.85
davleydenta@hotmail.com

Dentec Depósito Dental
Chihuahua, Chihuahua
01.614.410.03.68
dentec@dentec.com.mx

Depósito Dental Daycos de Chiapas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
01.961.61.266.80
daycos_de_chiapas@hotmail.com

Depósito Dental Di Denal
Uruapan, Michoacán
01.452.524.33.56
ddn24@hotmail.com

Depósito Dental Distrident
Mérida, Yucatán
01.999.923.28.05
distrident@hotmail.com

Depósito Dental DONOSTI
Oaxaca, Oaxaca
01.951.513.91.23

Depósito Dental Equipos y Materiales Dentales Willy
Boca del Río, Veracruz
01.229.927-30-95

Depósito Dental El Camino
Puebla, Puebla
01.222.246.42.10
dentalcamino@hotmail.com

Depósito Dental Express
Cancun, Quintana Roo
01.998.884.91.01
depositoexpress@prodigy.net.mx

Depósito Dental Evolución
Dental Silva
Morelia, Michoacán
01.443.324.11.27
depo_dentsilva@hotmail.com

Depósito Dental Gaby Dent
Veracruz, Veracruz
01.229.931.52.58
gaby_dent@hotmail.com

Depósito Dental Gama
Cuernavaca, Morelos
01.777.312.39.96
ely.gamav@hotmail.com

Depósito Dental García
León, Guanajuato
01.477.718.43.85
garciabermudez@yahoo.com.mx

Depósito Dental Gardent
Irapuato, Guanajuato
01.462.624.20.79
gardentirapuato@hotmail.com

Depósito Dental Gómez
Zamora, Michoacán
01.351.512.23.24
depositodentalgomez@hotmail.com

Depósito Dental Gómez Farias
Tijuana, Baja California
01.664.290.02.65
depositodentalgomezarias@hotmail.com

Depósito Dental Guerrero
León, Guanajuato
01.477.713.78.83
dentalguerrero.guerrero238@gmail.com

Depósito Dental Herfran
San Juan Del Río, Qro
01-427-272.88.08

Depósito Dental Hidalgo
Pachuca, Hidalgo
01.771.713.26.79
dentalhgo@hotmail.com

Depósito Dental Ivory
Guadalajara, Jalisco
01.333.825.98.26
ivorydent@hotmail.com

Depósito Dental Ivoden Gayosso
Tulancingo, Hidalgo
01-775-753-24-60
ivodent_tulancingo@yahoo.com.mx

Depósito Dental Juarez
Poza Rica, Veracruz
01.782.823.20.86
deposito_dentaljuarez@hotmail.com

Depósito Dental Lab
Guadalajara, Jalisco
01.331.202.06.24
guridi3@hotmail.com

Depósito Dental Maesa
S.L.P., S.L.P.
01.444.818.73.26
lourdes_gallegos@yahoo.com.mx

Depósito Dental Maldonado
Celaya, Guanajuato
01.461.612.31.86

Depósito Dental Maram
Guadalajara, Jalisco
01.333.826.07.27
kmalus@maram.com.mx

Depósito Dental Mexico
Puebla, Puebla
01.222.240.88.64

Depósito Dental Mildent
Puebla, Puebla
01.222.232.40.25
milartden@yahoo.com.mx

Prodent Monterrey
León, Guanajuato
01.477.716.45.30
prodentmonterrey@yahoo.com.mx

Depósito Dental Mundi-Dent
Cuernavaca, Morelos
01.777.318.72.87
mundident_dephotmail.com

Depósito Dental Mundo Dental
Monterrey, Nuevo León
01.818.030.78.18
crenau@hotmail.com

Depósito Dental Nazahi
León, Guanajuato
01.477.717.00.53
deposidonazhai@hotmail.com

Productos Dentales Odontec
Culiacán, Sinaloa
01.667.712.00.34
zaon17@hotmail.com

Depósito Dental Odontotec
Jiutepec, Morelos
01.777.319.06.96
odontec@hotmail.com

Depósito Dental Paliza
Culiacán, Sinaloa
01.667.716.19.34
palizadental@hotmail.com

Productos Dentales del Pacífico
Mazatlán, Sinaloa
01.669.981.15.98
productos_dentalesdelpacifico@hotmail.com

Depósito Dental Puebla
Puebla, Puebla
01.222.240.57.84
d.d.puebla@hotmail.com

Depósito Dental Plazas Del Sol
Querétaro, Querétaro
01.442.403.87.26
olverajp@gmail.com

Depósito Dental Del Real
Morelia, Michoacán
01.443.324.54.72
doloreservin@hotmail.com

Corporación Dental Stanford
S.L.P., S.L.P.
01.444.814.99.20
cdentalstanford@hotmail.com

Depósito Dental Treviño
Monterrey, Nuevo León
01.818.346.56.17
onivert@intercable.net

Depósito Dental Tecnodent
Morelia, Michoacán
01.443.313.44.83
leti_olivos@hotmail.com

Depósito Dental Toscano
Medina
Oaxaca, Oaxaca
01.951.515.95.11
jav128@prodigy.net.mx

Depósito Dental Vacnort
Irapuato, Guanajuato
01.462.626.13.51

Depósito Dental Valencia
Morelia, Michoacán
01.443.314.83.25
valencia_dental@hotmail.com

Concepto Dental
Puebla, Puebla
01.222.591.68.40

GS Dental
Puebla, Puebla
01.222.211.10.99
gs_dental@hotmail.com

Productos y Servicios Dentales Orizaba
Orizaba, Ver.
01.272.725.02.43
dental700609@prodigy.net.mx



Alta Técnica Dental

Baja California 52
Roma Norte
México DF

5523.3763
5523.6107
01800.633.7400

tecnicadental.com

1ER. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES, PRÓTESIS FIJA Y ESTÉTICA

EVENTO PARA ODONTÓLOGOS, IMPLANTÓLOGOS, PRÓTESISTAS Y TÉCNICOS DENTALES

Dr. Fidel Sotelo, México
Dr. Francisco Cabrera, México
MDT. Germano Gritti, Italia
MDT. Mauro Sant, Suiza
Dr. Nestor Schejtman, México

Dr. Onan Martínez, Venezuela
MDT. Peer Kulzer, Alemania
MDT. Pere Baldomà, España
TPD. Roberto González, México
MDT. Thomas Graber, Suiza

Informes: 5523.6107 / 5543.0499 / 5523.3763. Lada: 01800.633.7400

Evento Exclusivo organizado por Alta Técnica Dental

EL EVENTO MÁS ESPERADO EN EL MUNDO DENTAL

8 Y 9 MARZO 2013



EXPO REFORMA CIUDAD DE MÉXICO



Barras sobre implantes desde Hader hasta
Micro fresados
3er Módulo
8 y 9 de Febrero 2013
Curso-Taller

Estética de Disilicato de litio, textura,
maquillaje y glaseados perfectos
23 de Marzo 2013
Conferencia-Taller

Imparte Jorge Argüello
Informes: 5687.8536 / 4429.0732

VITA

Curso Intermedio en metal Ceramica VITA
VMK Master

Training Center de la Ciudad de México
Calle Tepic no. 139 int. 604. Col. Roma Sur
7 y 8 de Febrero de 2013

Curso Avanzado VITA VM9 sobre Circonio
Ciudad de Puebla
27 poniente no. 1503. Col. Volcanes
26 y 27 de Abril de 2013

Curso Sistema Prensado Vita PM9 con Add-On
Training Center de la Ciudad de México
Calle Tepic no. 139 int. 604. Col. Roma Sur
30 y 31 de Mayo de 2013

Info: 01800 300 3009 / 0155 5785 6755 /
www.vita.com.mx

Zirkonzahn®

- Cursos Prettau "A" y Cerámica con: el
TPD Master Mauricio Cuéllar del 8 al 11
de Enero
- Curso de Introducción al Sistema de
Fresado Manual. 14 y 15 Enero
- Semana intensiva Curso CAD/CAM del
21 al 25 de Enero
- Curso Prettau "B" del 28 al 30 de Enero
- Presentaciones CAD/CAM todos los jue-
ves del mes de 9:00 a 14:00 Hs.

Mayores informes:
Zirkonzahn México S.A. de C.V.
Tel: 01 462 62 2 22 24
Info.mex@zirkonzahn.com
www.zirkonzahn.com



Curso de Prótesis Fija
Elaborando 1 puente anterior
de 3 unidades y 1 corona posterior

Alianza con VITA y Zhermak
México DF "Training Center Dentaurum"

Informes: 5250-0450 / 5250-3378
info@cdewinter.com



1ER ENCUENTRO INTERNACIONAL
ARGODENT 2013
"CIENCIA Y ESCULTURA EN ARTE DE
CREAR"

16 Y 17 de Enero
Sede: Hotel San Luis Lindavista. Culiacán,
Sinaloa, México

Costo Boleto General: \$1,200
Costo Boleto Estudiante: \$700

Informes: 01 (667) 713.2852
01 (667) 257.9507
argodent74@hotmail.com
arturogodoy74@hotmail.com



Impartido por T.P.D Helio Mureddu
Costo: \$1,000 (Incluye modelo con cofia)
Duración 8 hrs. con comida
Informes: 5514.8721 / 5519.0014
5560.5634 / www.ideasdentales.com

f Ideas Dentales @ideasdentales

Impartido por Lic. Yong O Kim
Costo: \$2,500 (Incluye modelo con
análogo de implante)
Duración: 5 a 6 Hrs.
Informes: 5514.8721 / 5519.0014
5560.5634 / www.ideasdentales.com

f Ideas Dentales @ideasdentales

Vendo

Vendo horno pro Press 100 Modelo 2001. La mufla, tarjeta madre, y otras cosas son seminuevas. Prensa Empress, e-max (Dsi-silicaro de litio) \$37,000. Informes: (01777) 3132988. sedentlab@yahoo.com.mx

Vendo horno para metal porcelana tipo Ney digital. Seminuevo. Acepto cambio por auto-móvil. \$18,000. Informes: 1115.3812.

Vendo horno EP 600 combi de Ivoclar cocción y prensado de E-max y Empress. En excelentes condiciones. Informes: 01 3333432232 Francisco Sosa.

Vendo NT- Press versión 2.2 seminuevo, pantalla touch y multimedia, para cocción y prensado va con programas de e.max press \$90,000 pesos. Informes a diartdent@hotmail.com o tels: 57603960, 26035429

Vendo horno de porcelana para cocción y prensado Ep 3000 Ivoclar. Seminuevo. Contiene 2 kits básicos completos E-max Ceram y un D Sing. Buen precio. Informes: gricel_16@hotmail.com o tel. 01 (443)2772356

Vendo horno Ney 660 en excelentes condiciones. Precio: \$15,000. Informes: 5523.3763 / 01800.633.7400 ext.5 Ángel García.

Vendo Micho Martillo Neumático. tres niveles de intensidad. \$2,500. Informes: 1056.9434. Sr. Edgar López.

Vende espatuladora de vacío Whip-Mix seminueva. \$13,500 a tratar. Informes Cel: 04455.91985296

Vendo equipo de rayos X panorámico marca Gendex Modelo GX PAN. Seminuevo. Año de fabricación 2003. Informes: ferheer@hotmail.com Tels: (33) 3616-7347 Y (33) 1369-8044 Cel: (33) 1142-7343

Vendo horno de porcelana sunfire 10. Excelentes condiciones. 60 programas. Bomba de vacío incluida. \$18.000 Informes: rafiux70s@hotmail.com

Solicito

Solicito técnico dental para el área de metales con algo de experiencia. Informes: Tel: 2451.9101 o Nextel: 3624.9567. Ruth Mayen

Estética Dental solicita ceramista dental con experiencia en e-max, alúmina, metal, porcelana y zirconia. Zona Norte Tlalnepantla. Atrás de Mundo E. Informes: guillermourban@hotmail.com 35362504 / 05

Solicito técnico o ayudante de técnico con excelente presentación, experiencia en montar porcelana. Cerca Metro San Joaquín. Informes: 55452299 / 52039061 Cel 0445539031187. pablodelaparra@hotmail.com

Solicito trabajo medio tiempo, estudiante técnico dental, se hacer dados de trabajo, prostodoncia, calibrar metales, zirconia, he trabajo en laboratorio más de 2 años. Tel.17110793 cel.5520491044

Solicito técnico Dental para trabajar en las distintas áreas del laboratorio de protesista. Disposición para trabajar. Sexo masculino o femenino, sueldo según aptitudes, trabajo en el estado de Querétaro Municipio del Márquez, en Los Héroes Comunicarse al correo: laboratoriodisuma@hotmail.com o al tel: 4421126041



El costo por anuncio:

Para público general es de **\$150**
Para suscriptores a la revista es **Gratuito**

Comunícate a los telefonos:
5523.3763 / 01800.633.7400

Solicito técnico Dental que tenga experiencia en cerámica, para radicar en la ciudad de Aguascalientes, comunicarse a los tels. (449) 9940742 y 1626239

Solicito técnico dental con experiencia en el modelado, vaciado y repasado de estructuras fijas, para trabajar en Chiapas. Informes: Tel: 045.967.11.11.702. José Bermúdez

Solicito Técnico dental que sepa hacer acrílicos, modelos de trabajo y calibrar zirconia. Sexo indistinto. Horario de 9 a 6 con una hora de comida, sueldo según aptitudes, llamar para más informes al 57-68-05-47 o 57-68-03-76. Rosa María Castillo o José Luis Lona. Trabajo en el D.F cerca del metro Jamaica.

VACIADOS DENTALES "XOLA"

Gerardo Cruz F.
Sergio Alvarez M.

Calz. De TLALPAN # 689 Bis, Col. ALAMOS

Lunes a Viernes de 8:00 - 20:00
Sábados 8:00 - 14:00
Tel. 5590-9528

NUEVO

For Better Dentistry

DENTSPLY

StarLoy N'

La nueva **estrella** de México

- ★ Excelentes propiedades mecánicas y alta resistencia a la corrosión.
- ★ Fácil de tallar, ajustar y pulir.
- ★ Gran unión a las porcelanas dentales como Ceramco, Duceram KISS y muchas más.
- ★ Baja conductividad térmica que reduce las molestias en boca por los cambios de temperatura.
- ★ Libre de Berilio para seguridad en el laboratorio y del paciente.

Composición

Propiedades

	%
Ni	61
Cr	25.8
Mo	11
Si	1.5
W	<0.5
Al	<0.4

Temperatura de fundición	1325 – 1350 °C
CTE 25 – 500 °C	13.8 µm / m-K
CTE 25 – 600 °C	14.4 µm / m-K
Densidad	8.2 g / cm3
Dureza	185 HV 10
Resistencia a la tensión	550 N / mm2
Módulo de elasticidad	115 GPa

Star Loy N'

www.dentsply.com.mx

Solicite el instructivo de uso: Tel. 5587 6488 ext. 248

01800 716 6779

NIC TONE[®]



MDC[®]
DENTAL

Gdl: (33) 3833-0333
Mexico, D.F. (55) 5547-4747
01 800 3637 800

www.dental.com.mx
mdc@dental.com.mx